

Instruções e dicas

CURAPROX

HYDROSONIC PRO



**Cadastre-se
já!**

loja.curaprox.com.br

 SWISS PREMIUM ORAL CARE

HYDROSONIC PRO

Manual em Português

Cumprimentos

Parabéns por adquirir a escova de dentes sônica Hydrosonic Pro da CURAPROX.

CURAPROX é a marca de saúde oral da CURADEN AG, com sede em Kriens, na Suíça. Desde 1972, a CURAPROX trabalha em conjunto com especialistas, pesquisadores, professores e clínicas para desenvolver escovas dentais eficazes e atraumáticas para higiene oral.

Hydrosonic Pro

Para uma higiene profissional dos dentes em casa. Especialmente adequada para aparelhos ortodônticos, implantes dentais, problemas gengivais, e para manter os dentes e gengivas saudáveis todos os dias.

Leia este manual de instruções com atenção antes de usar a escova sônica e guarde-o para referências futuras.

Atenção

Se você tiver se submetido a uma cirurgia nos dentes ou gengivas recentemente, ou na presença de lúpus eritematoso sistêmico, consulte o seu cirurgião-dentista antes de usar a Hydrosonic Pro. Se você tiver sangramento excessivo após usar este dispositivo, entre em contato com o seu cirurgião-dentista imediatamente. Esta escova de dentes pode ser usada por crianças e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com pouca experiência e conhecimento, desde que devidamente supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho de forma segura e que compreendam os riscos envolvidos. A higiene oral com a escova Hydrosonic Pro não deve ser feita por crianças sem orientação. Crianças não devem brincar com o aparelho. A Hydrosonic Pro está em conformidade com os padrões de segurança para dispositivos eletromagnéticos. Caso utilize um implante ou marca-passo e tenha dúvidas sobre a utilização do dispositivo, entre em contato com o seu médico ou com o fabricante do seu implante ou marca-passo.

Nota de segurança

Atenção: para recarregar a bateria, utilize somente o carregador fornecido com este aparelho / escova sônica. Este aparelho contém baterias que não podem ser substituídas. Antes de usar, verifique se a voltagem indicada no dispositivo está em conformidade com a

rede de alimentação local. Se o carregador da Hydrosonic ou o cabo de conexão estiverem danificados, não use ou tente reparar você mesmo. O cabo de alimentação não pode ser substituído. Caso o cabo esteja danificado, todo o dispositivo deve ser substituído. Todas as substituições devem ser realizadas pelo nosso serviço de atendimento ao cliente (SAC: +55(11)42274190 / sac@curaprox.com.br). Mantenha o carregador longe de água e não mergulhe em água ou outros líquidos. Limpando o carregador: desconecte da rede antes de limpar e reconecte somente quando o carregador estiver completamente seco. Nunca carregue o dispositivo sem vigilância.

Descarte ecológico

Não descarte este produto com o lixo doméstico normal ao final de sua vida útil. Leve-o a um centro de reciclagem ou ponto de coleta oficial de sua cidade. Isto ajuda a proteger o meio ambiente. A bateria recarregável integrada contém substâncias que podem pôr em risco o meio ambiente. Portanto, favor levar a unidade usada a um centro oficial de reciclagem ou a um ponto de coleta.



Descarte adequado deste produto

Na UE, este símbolo indica que este produto não deve ser descartado com o lixo doméstico. Aparelhos antigos contêm materiais recicláveis valiosos. Eles devem ser reciclados

a fim de prevenir danos ao meio ambiente ou à saúde humana devido a descarte inadequado de resíduos. Portanto, favor descartar os dispositivos antigos através de um sistema de coleta adequado ou envie o dispositivo de volta ao local onde o comprou para o descarte adequado. Estes garantirão que o dispositivo seja reciclado adequadamente.

Dados técnicos para conexão USB

Entrada do adaptador: 240 VAC, 50/60 Hz, 0,2A máx.

Saída do adaptador: 5 VDC, 600mA

Dados técnicos da estação de carregamento com cabo USB

Entrada: 5 VDC, 600mA

Base única, sapatas de borracha

Dados técnicos da unidade portátil

- Bateria: íons de lítio (3,7 VDC, 700mAh)
- Tempo ideal de carregamento da bateria: 10 horas
- Tempo de operação por carga de bateria: aprox. 60 min. Isso é equivalente a 15 dias se escovar os dentes por quatro minutos todos os dias.
- Movimentos de escovação: 44.000, 62.000 até 84.000; os dois últimos, em três modos cada
- Temporizador de quadrante: 30 segundos
- Temporizador de escovação: dois minutos
- Desligamento automático: após quatro minutos
- Acessórios: 1 x cabeça de escova «sensitive»
 - 1 x cabeça de escova «power»
 - 1 x cabeça de escova «single»
 - 1 x carregador com cabo USB
 - 1 x cabo USB
 - 1 x caixa plástica de viagem
 - 1 x manual de instruções


HYDROSONIC PRO

O funcionamento básico	8
Instruções de carregamento	9
Os sete modos de operação	10
Usando a escova e fazendo-a funcionar	11

Escovar com aparelho ortodôntico: instruções	12
Escovar sem aparelho ortodôntico: instruções	13
Escovação da margem gengival: instruções	17
O acessório escova unitufo: outras instruções	18

Conceito: mecânico e hidrodinâmico	20
Conceito: escovas inteligentes	21

Repetir pedidos: Cabeças de escova	24
------------------------------------	----

Conformidade 

Inscriba-se
em nosso canal do
YouTube:

<https://m.youtube.com/watch?v=demR7ZZ-o00>

Solução de problemas

Problema	Possível causa	Solução
· O dispositivo não está funcionando	· A bateria do dispositivo não está carregada	· Assente a unidade portátil corretamente no no carregador · Carregue a Hydrosonic Pro completamente antes do primeiro uso. O tempo de carregamento é de cerca de dez horas
· O desempenho da escovação está ficando mais fraco	· A cabeça da escova está suja ou desgastada	· Limpe ou troque a cabeça da escova
· Você sente um leve formigamento ao usar a escova de dentes sônica	· Se você estiver usando uma escova de dentes sônica pela primeira vez, esta é uma sensação normal	· Você vai se acostumar com a sensação depois de usar a escova de dentes sônica por um tempo

Conteúdo da embalagem

- 1 x unidade portátil Hydrosonic Pro
- 1 x cabeça de escova «sensitive»
- 1 x cabeça de escova «power»
- 1 x cabeça de escova «single»
- 1 x carregador com cabo USB
- 1 x plugue USB
- 1 x nécessaire de viagem
- 1 x manual de instruções




O BÁSICO

Escolha sua cabeça de escova

- «sensitive» ou «power» para escovar os dentes e gengivas saudáveis, bem como para problemas gengivais, implantes e aparelhos ortodônticos.
- «unitufo» para pontos de contato com aparelhos ortodônticos, bráquetes, aparelhos linguais, retentores; e para higiene da margem gengival.

As cabeças da escova são fáceis de fixar e remover.

Cuidado: não dobrar (risco de quebra e avarias).

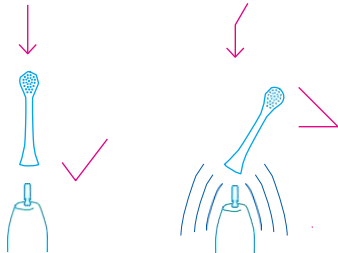

Ligar e desligar: pressionar brevemente o botão

Pressionar brevemente: liga/desliga



Seleção de modo


Pressionar e manter o botão apertado; soltar no modo desejado. Quando ligar, a Hydrosonic Pro começará no último modo selecionado. O movimento das cerdas será automático e imediatamente reduzido quando for utilizada força excessiva.

Pressionar longo: seleção de modo



NÍVEL DE CARGA: SEMPRE FORÇA PLENA


- Carregue completamente a Hydrosonic Pro antes da primeira utilização.
- Tempo ideal de carga da bateria: 10 horas
- Para carregar, colocar a Hydrosonic Pro no carregador, que deve ser ligado à rede elétrica: ligar o cabo USB à porta USB do carregador, e ligar à rede elétrica. Também se pode carregar o dispositivo usando a porta USB do seu laptop ou computador.
- Você pode ver o estado da carga ao retirar a Hydrosonic Pro do carregador ou ao desligá-la.
- Se todos os sete LEDs no visor se acenderem, a bateria estará totalmente carregada; quanto mais os LEDs se acendem, mais carregada estará a bateria.
- Se o LED inferior estiver vermelho em vez de azul, a bateria está com menos de 20 % de carga.
- Uma vez que totalmente carregada, a bateria irá durar cerca de 60 minutos, o que equivale a duas semanas de escovação de quatro minutos por dia.
- Para uma vida extralonga, carregue a sua escova de dentes apenas quando o estado da bateria estiver abaixo dos 20% (o LED vermelho indicará isto).
- Sempre com força plena: o desempenho da higiene não muda à medida que a bateria se esgota. A Hydrosonic Pro higieniza tão bem com bateria fraca como quando está totalmente carregada.

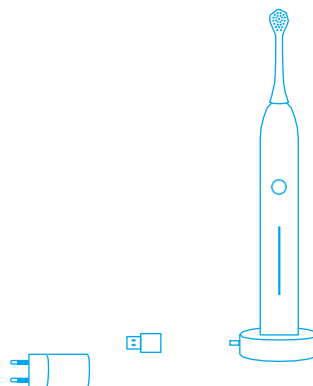

Carregamento: Use o carregador ou a porta USB do seu notebook/computador

OS SETE MODOS: EXPERIMENTE-OS

Ligar e manter o botão pressionado. A Hydrosonic Pro passa por todos os sete modos.

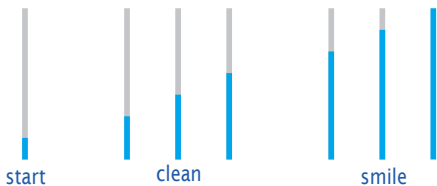

Modo «start»

Inicialmente temos o modo «start». Indicamos usar esse modo, para a escovação das áreas de contato, em aparelhos ortodônticos, próteses, ao redor de implantes, e para a escovação da margem gengival. Recomendação: Use a cabeça «single». Este modo oferece 44.000 vibrações por minuto. Apenas o LED inferior fica aceso.

Três modos «clean»

Em seguida há o modo «clean», que tem três variações de movimentos diferentes, cada um com 62.000 vibrações por minuto. Para cada modo, um novo LED se acenderá no visor. Recomendação: Use a cabeça «sensitive» ou «power».

Três modos «smile»

Por fim, temos os três diferentes modos mais intensos denominados «smile», cada um com 84.000 vibrações por minuto, até que todos os LEDs se acendam. Depois disso, os 7 diferentes modos iniciam novamente. Recomendação: use o acessório «sensitive» ou «power».

Velocidade ajustável

Selecione seu modo favorito, liberando o botão quando chegar ao modo que for mais agradável para você e de acordo com as recomendações de seu cirurgião-dentista. Ele ficará salvo para a próxima vez que você escovar.

Interrupções

Três pausas curtas e consecutivas de 0,2 segundos cada, indicarão que 30 segundos se passaram. Uma interrupção longa significa que dois minutos se passaram. Após quatro minutos, a Hydrosonic Pro desliga automaticamente.

Dica: qualquer modo oferece uma higienização excelente. Com exceção do modo "start", que deve ser utilizado com a cabeça unitufo «single», todos os modos são fortes o suficiente para fornecer não apenas a ação mecânica das cerdas, mas também um efeito hidrodinâmico pela ação das ondas sônicas que promovem um turbilhonamento no local.

USANDO A ESCOVA: O MELHOR MÉTODO

- As cabeças da escova são de alta tecnologia e vêm com os melhores filamentos de CUREN®. Devido as 84.000 vibrações por minuto, há um considerável nível de estresse sobre as cerdas da Hydrosonic Pro.
- Portanto, você deve trocar a cabeça da escova pelo menos a cada três meses.
- Após o uso, enxágue a cabeça da escova e as cerdas em água corrente.
- Se você utiliza aparelhos ortodônticos com bráquetes e arcos, implantes ou próteses, o nível de desgaste é ainda maior. Neste caso, é melhor trocar a cabeça da escova após sete ou oito semanas. Isso vale a pena.

COMEÇAR: TESTAR A SENSIBILIDADE

- Escolha o seu modo favorito entre «clean» e «smile» enquanto mantém a escova encostada ao dente — vá sentindo. Dessa maneira a escovação será especialmente agradável.
- E, sim, experimente as duas cabeças de escova, «sensitive» e «power». Qual é que proporciona a melhor sensibilidade?
- Do ponto de vista da higiene, não importa qual dos três níveis «clean» ou «smile» você escolher.


Nota: Os modos «clean» e «smile» são adequados para escovar dentes e gengivas saudáveis, bem como para problemas gengivais, implantes e aparelhos ortodônticos - recomendamos a utilização da cabeça da escova «single» apenas no modo «start».

ESCOVAÇÃO COM APARELHO: INSTRUÇÕES

Bráquetes afixados nos dentes formam nichos adicionais para higienizar. Escovar bem estes nichos é um fator decisivo na saúde oral. Quer tenha bráquetes vestibulares, bráquetes linguais ou retentores - graças à Hydrosonic Pro, escovar é fácil e os seus dentes e gengivas se mantêm saudáveis.


Escovação básica

Usando a cabeça da escova «sensitive» ou «power», vá de dente em dente, entre o seu bráquete e a margem da gengiva, isto é, somente acima ou abaixo dos bráquetes, num dos níveis de «clean» a «smile». Assim você higieniza a sua margem gengival ao mesmo tempo. Por fim, escove o outro lado dos bráquetes, também de dente em dente.

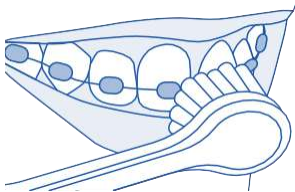


Bráquetes

Assim se higienizam as áreas de contato e os bráquetes vestibulares: usando o acessório «single», aplicar movimentos mínimos ao redor dos bráquetes, bem devagar, quase sem força/pressão, no modo «start».

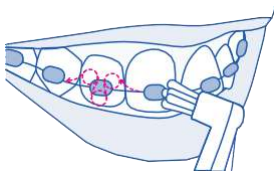

Bráquetes linguais e retentores

O mesmo vale para os bráquetes afixados na face lingual dos dentes. Utilizando o acessório «single», conduza devagar e com cuidado ao longo dos bráquetes linguais ou retentores, quase sem pressão, no modo «start». Graças a CURACURVE®, estas áreas atrás dos seus dentes ficam fáceis de alcançar.

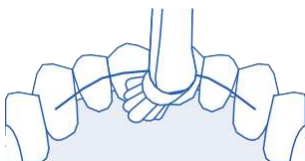


Instruções em vídeo: www.curaprox.com

ESCOVAÇÃO SEM APARELHO: INSTRUÇÕES

E depois dos bráquetes? Continue a escovação minuciosa. Você tem tudo o que precisa: a Hydrosonic, as cabeças de escova «sensitive» e «power» e o acessório exclusivo «single».


1. Umedeça a cabeça da escova e aplique um pouco de creme dental CURAPROX (SLS Free).
2. Coloque a escova sobre os dentes e posicione-a em ângulo de $\pm 45^\circ$ de forma que a escova fique apoiada suavemente, metade sobre os dentes e metade sobre a gengiva.

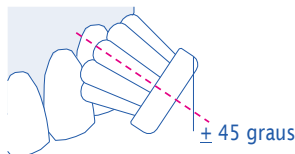


3. Higiene dente a dente: permanecer em cada dente num ângulo de ± 45 graus durante dois a três segundos. Não aplique nenhuma força/pressão.

Movimento de inclinação

Incline a Hydrosonic Pro uma ou duas vezes, como se quisesse tentar inserir as cerdas entre os dentes. Faça isto muito lentamente e sem aplicar força/pressão.


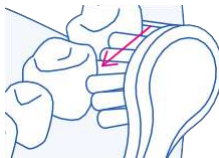


Permaneça sobre cada dente por dois ou três segundos enquanto inclina a escova uma ou duas vezes para higienizar completamente as regiões.

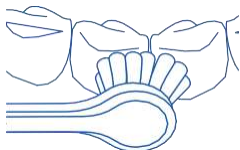

4. Após 30 segundos, três pausas curtas e consecutivas de 0,2 segundos cada indicará que é tempo de passar para um quadrante diferente da sua boca (arcos dentais).


5. Repita o processo de limpeza em todos os quadrantes. Certifique-se de que de preferência siga sempre a mesma ordem ao escovar, para que não se esqueça de nenhum dente.

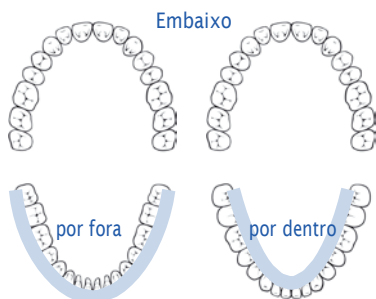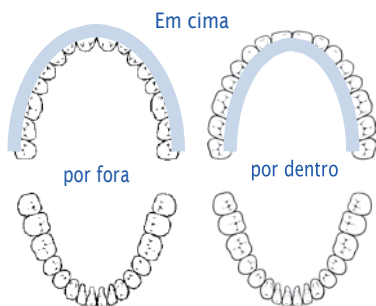

6. Uma longa interrupção indica que já se passaram dois minutos. Após quatro minutos, a Hydrosonic Pro desliga automaticamente.

7. Higienize os implantes com a Hydrosonic Pro como se estivesse escovando os dentes naturais. Nem precisa se preocupar se usar implantes e próteses. É altamente recomendável cuidar dos implantes com escovas interdentais e/ou específicas de implantes (CS 708 e CS 1009), pois a margem da gengiva próxima ao implante exige cuidado especial na higiene. Favor consultar o seu cirurgião-dentista para maiores orientações.

Para implantes híbridos: a Hydrosonic Pro é ideal para a higiene de barras e botões de encaixe.

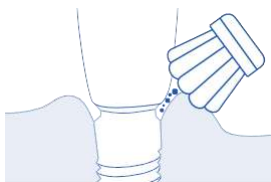

8. É especialmente importante que as crianças e os jovens escovem também as superfícies da mastigação que apresentem fôssulas, fissuras e irregularidades profundas. Da mesma forma, sem força/pressão, mova a Hydrosonic dente a dente, de superfície de mastigação a superfície de mastigação, e deixe a Hydrosonic Pro fazer o seu trabalho durante dois a três segundos de cada vez.




9. Para restaurações, implantes, coroas e próteses: simplesmente proceda como descrito nestas instruções

10. De acordo com as recomendações, deve-se escovar por pelo menos dois minutos. Prolongar este tempo de escovação irá melhorar a saúde oral. A escova de dentes pode ser desligada a qualquer momento.


Importante:

Não exerça qualquer força/pressão sobre a escova de dentes. Para assegurar uma higiene ideal, coloque a sua Hydrosonic Pro suavemente sobre a superfície dos dentes e escove dente a dente. Essa abordagem irá assegurar uma profilaxia ideal. Caso as suas gengivas se tornem sensíveis após a segunda ou terceira utilização, significa uso inadequado da Hydrosonic Pro. Neste caso, leia novamente com cuidado estas instruções ou consulte o seu cirurgião-dentista ou higienista dental para maiores orientações.

- a. Dentes anteriores superiores e inferiores: Para escovar a parte interior dos dentes anteriores inferiores e superiores, segure a Hydrosonic Pro verticalmente e incline-a para a direita e para a esquerda algumas vezes, antes de passar para o dente seguinte.

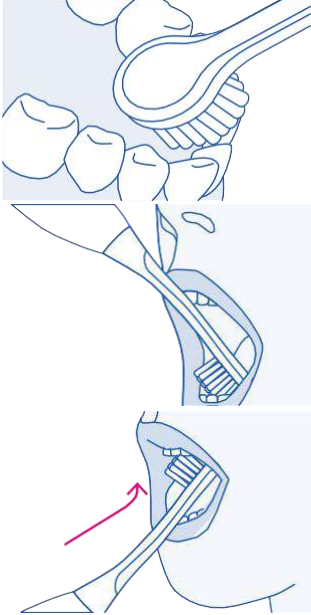

- b. Molares superiores e inferiores: posicione a Hydrosonic Pro por um ângulo atrás do molar e permaneça aí por dois a três segundos.

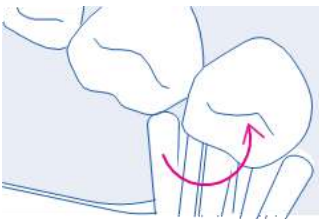


HIGIENE DA MARGEM GENGIVAL: INSTRUÇÕES

O acessório «single» deveria, na verdade, ser chamado de acessório multiuso, por ter tantas utilidades e aplicações diferentes.


Escovação da margem gengival

Muitos microrganismos e bactérias escondem-se no sulco existente entre os dentes e as gengivas. A cabeça da escova única permite a escovação da margem gengival de forma eficaz, porém com suavidade:


1. Coloque a escova «single» em um dos lados do dente, perpendicular à superfície do dente. Isto não exige creme dental.

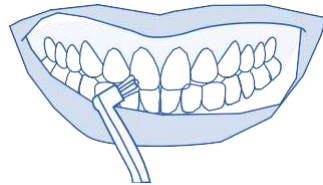

2. As cerdas mais exteriores devem conseguir penetrar delicada e suavemente na margem gengival, quase sem qualquer força/pressão.

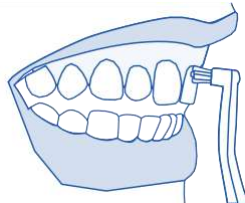


3. Agora, mova a escova single ao longo da margem gengival sem aplicar qualquer força/pressão, deslocando-se de um lado do dente para o outro. Manter sempre a cabeça da escova single perpendicular à superfície do dente.

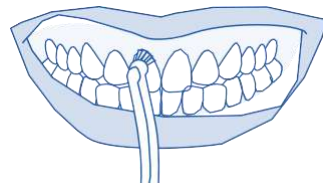

4. Proceda da mesma forma para a parte de trás dos dentes (faces linguais dos dentes).


Posicione a cabeça da escova single em uma das extremidades do dente. Toque suavemente na margem gengival e escove o dente utilizando o mesmo princípio que utilizou na parte da frente (faces vestibulares dos dentes), deslizando a escova «single» por toda a margem gengival.

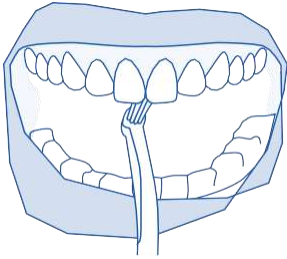

Agora avance para o dente seguinte. Então use o acessório da escova ou a cabeça da escova «single» para higienizar as superfícies de mastigação.


O ACESSÓRIO SINGLE: MAIS INSTRUÇÕES

No caso de dentes mal posicionados
conduza a cabeça da escova ao longo dos nichos e sobreposições com outros dentes, lentamente, quase sem qualquer força/pressão.

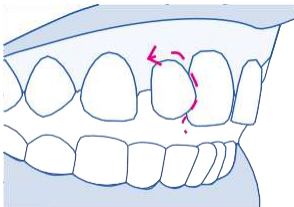


Em implantes

Para uma extensa longevidade, os implantes precisam de bons cuidados. Higienize muito bem, de forma minuciosa e quase sem qualquer força/pressão as áreas críticas: a margem da gengiva ao redor do implante (espaço peri-implantar). Para isto, a escova «single» é o melhor instrumento.

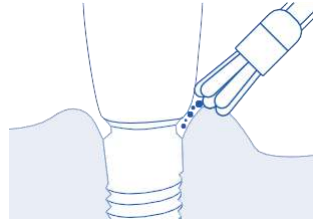


Para uma grande lisura de superfície/polimento

Escove cada superfície dental com a cabeça da escova «single», quase sem qualquer força/pressão, e utilize pequenos movimentos circulares em um dos níveis de «clean» a «smile». Use a sua língua para sentir como os seus dentes ficam suaves e lisos.

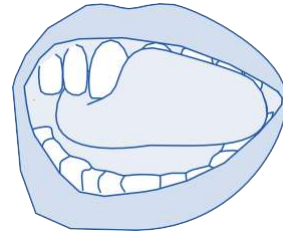

Em caso de formação intensa de tártaro

Pessoas com uma formação especialmente intensa de tártaro devem mover a escova single ao longo da linha da gengiva, quase sem pressão alguma, em um dos níveis «clean» até «smile».

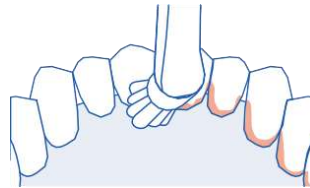

CONCEITO: MECÂNICO E HIDRODINÂMICO

Eficaz e sem machucar

Com mais de 30.000 vibrações por minuto, os modos «clean» e «smile» permitem uma limpeza mais eficaz e suave do que com uma escova de dentes manual. É quase impossível machucar os seus dentes e/ou gengivas.

Os dentes e entre eles (região proximal)

Graças à tecnologia sônica, a Hydrosonic Pro proporciona uma limpeza incrivelmente completa, não só nos dentes e na margem gengival, mas também, nos espaços localizados entre os seus dentes.

Margem gengival e bolsas periodontais

A Hydrosonic desorganiza a placa bacteriana da margem gengival e elimina milhões de bactérias presentes no biofilme oral de bolsas periodontais - graças à sua tecnologia sônica e efeito hidrodinâmico.

Limpeza Mecânica

A velocidade dos movimentos da cerda assegura um excelente desempenho na higienização mecânica.

Hidrodinâmica

Esta alta velocidade leva a turbulências na mistura de saliva e creme dental. Este turbilhonamento, remove muitas bactérias do biofilme oral, onde as cerdas não conseguem alcançar, como os espaços entre os seus dentes. Porém, as escovas interdentais Curaprox Prime, continuam fundamentais e devem sempre ser utilizadas em conjunto com a escova Hydrosonic Pro para a higiene da região interdental.

Em conjunto com as cabeças bem projetadas e suas cerdas exclusivas, a escova Hydrosonic Pro cumpre com as mais altas exigências em termos de higiene mecânica e hidrodinâmica.

CONCEITO: ESCOVA INTELIGENTE E CABEÇAS EXCLUSIVAS


A qualidade de uma escova de dentes sônica depende de sua potência. E ainda mais importantes são as cabeças das escovas, tanto o design como a qualidade das suas cerdas.

As cerdas

Utilizamos os filamentos de CUREN® em vez de nylon, que são o padrão da maioria das escovas. O benefício: O CUREN® quase não absorve água, portanto o desempenho permanece constante. Especialmente importante: O CUREN® é extremamente macio e tem um toque maravilhoso - mesmo a 84.000 vibrações por minuto.




O design e a disposição das cerdas

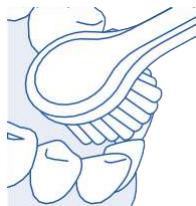

mais na página 13


O Prof. Dr. Med. Dent. Ulrich P. Saxer salienta os benefícios da forma de gota: Ela garante que cada dente seja individualmente escovado, resultando numa higiene de alta qualidade. Para isto as cerdas estão dispostas em diferentes alturas, de forma que os dentes sejam totalmente envolvidos.

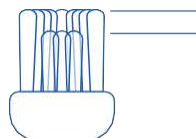

Longas no exterior, curtas no interior: essa disposição dos filamentos envolve cada dente individualmente para a higiene mecânica e hidrodinâmica ideal.


O movimento

Cabeças de escovas oscilantes, isto é, aquelas que se movem em círculos podem danificar a margem gengival se for aplicada força/pressão excessiva, se as cerdas forem demasiado duras, ou se forem utilizadas outras técnicas de escovação inadequadas. É por isso que os nossos profissionais de saúde oral decidiram por um movimento de ida e volta vertical. Isto tem três benefícios: é suave para a margem gengival; proporciona um cuidado minucioso; e oferece uma abordagem de higiene adicional, além da desorganização mecânica do biofilme oral: A ação hidrodinâmica. Os filamentos vibram e se movem tão rapidamente que a turbulência movimentada a mistura de saliva, água e creme dental dentro da boca. Isto significa que as áreas que os filamentos não podem alcançar, como, por exemplo, entre os dentes, são também higienizadas pelo turbilhão do efeito hidrodinâmico.

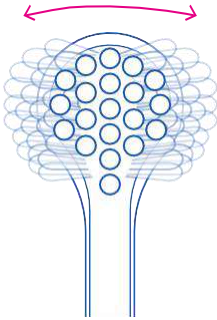

O caso especial

Concebida pelo especialista em saúde oral Dr. Jiri Sedelmayer como escova de dentes manual CS unitufo, o nosso acessório «single» agora também está disponível para a escova de dentes sônica. A escova unitufo é extremamente benéfica como acessório de escova de dentes sônica: permite escovar facilmente nichos e sulcos, como ao longo da margem gengival e ao redor dos bráquetes e implantes, com perfeição.

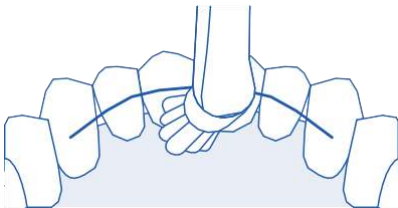

A ergonomia

Sim, os nossos acessórios de cabeça das cerdas são ligeiramente angulados. Esta curva de 10 ou 15 graus faz a diferença! A ergonomia é consideravelmente melhorada em áreas de difícil acesso, como atrás dos molares ou a parte interna dos dentes da frente, são facilmente alcançadas - graças a CURACURVE®, a nossa curva perfeita e angulação das cabeças da escova Hydrosonic Pro.



O Conforto

Como podemos tornar a sua experiência de escovação ainda mais agradável? As escovas de dentes sônicas em particular podem transmitir sensações desagradáveis quando a parte de trás da cabeça da escova toca um dente. A nossa solução: emborrachamos a parte de trás da escova de forma a não prejudicar o desempenho. Ou seja, tudo muito agradável, simples e eficaz.

As nossas inovações

Estamos orgulhosos da nossa inovadora tecnologia das cabeças da escova Hydrosonic Pro - e por isso produzimos as cabeças da escova na Suíça. E ficamos felizes quando você utiliza estas cabeças exclusivas para uma escovação inteligente. Estamos convencidos de elas o ajudarão a alcançar uma saúde oral ideal, de maneira fácil, eficaz, atraumática e prazerosa.



MADE IN SWITZERLAND

CABEÇAS DA ESCOVA:

Você pode obter os refs das cabeças da escova em loja.curaprox.com.br



power

Poderosa, mas suave.

Com os nossos filamentos extra macios de CUREN® e a perfeita CURACURVE®. Para gengivas saudáveis, ou por sua preferência. Cabeça extra pequena em forma de gota para uma higiene de alta eficácia, dente a dente. Complementa o efeito sônico hidrodinâmico.



sensitive

Especialmente suave, mas altamente eficaz. Com os filamentos ultra macios de CUREN® e a perfeita CURACURVE®. Para gengivas sensíveis, periodontite, ou só por gostar. Cabeça extra pequena em forma de gota para uma higiene muito suave, dente a dente. Complementa o efeito sônico hidrodinâmico.














single

Extra fina. Higieniza em áreas onde a placa está bem escondida: nos nichos de retenção, entre os dentes, bráquetes e arcos. E também a margem gengival. Praticamente indispensável para a higiene de implantes e para alcançar dentes mal posicionados. Também para o polimento das superfícies dentais, deixando uma textura lisa e macia.



Estas cabeças de escova foram desenvolvidas em conjunto com o Prof. Dr. Med. Dent. Ulrich P. Saxer e o especialista em saúde oral Dr. Jiri Sedelmayer.

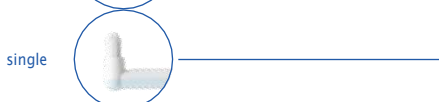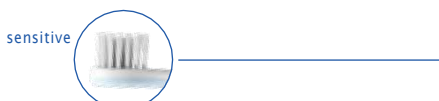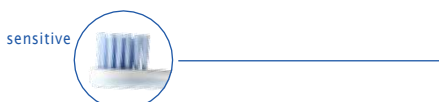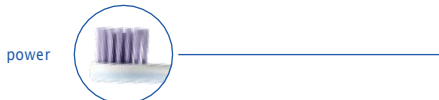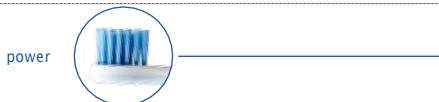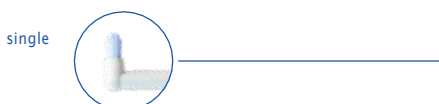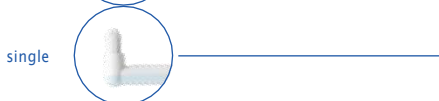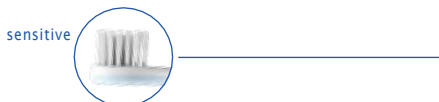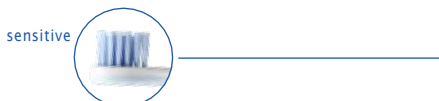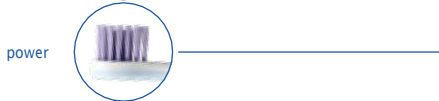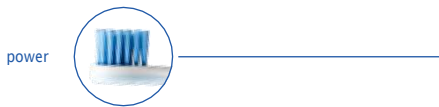

YES, SMILE.

curaden

 better health for you

CURADEN SWISS DO BRASIL IMP EXP LTDA

Estrada das Lágrimas, 111

São Caetano do Sul, SP, Brasil

CEP: 09581-300

T+55 (11) 42274190

sac@curaprox.com.br

www.curaprox.com.br

