



Referências

Lima reciprocante

Small - reciprocating file

3x small (020 07)	21mm	12331390004
3x small (020 07)	25mm	12331390008
3x small (020 07)	31mm	12331390012



Primary - reciprocating file

3x primary (025 07)	21mm	12331390003
3x primary (025 07)	25mm	12331390007
3x primary (025 07)	31mm	12331390011



Medium - reciprocating file

3x medium (035 06)	21mm	12331390002
3x medium (035 06)	25mm	12331390006
3x medium (035 06)	31mm	12331390010



Large - reciprocating file

3x large (045 05)	21mm	12331390001
3x large (045 05)	25mm	12331390005
3x large (045 05)	31mm	12331390009



Assortment Reciprocating File

1x small/primary/medium/large	21mm	12331410001
1x small/primary/medium/large	25mm	12331410002
1x small/primary/medium/large	31mm	12331410003



Lima reciprocante para Glide path

Glider - 015, 02 taper variado

3x	21mm	12336000000
3x	25mm	12336010000
3x	31mm	12336020000



WaveOne® Gold Sequence Blister



Blister contendo	
3 instrumentos de 25mm	12336060000
1 Lima WaveOne® Gold	
1 Lima WaveOne® Gold Glider	
1 Lima manual K-File	

WaveOne® Gold Conform Fit™ Gutta-Percha



Caixa com 60x pontas de Gutta-percha taper variado

Small	21332040010
Primary	21332030010
Medium	21332020010
Large	21332010010

Motor




X-SMART® Plus	12032120000
1 Motor com Contra ângulo	

WaveOne® Gold

Entre nessa onda
com confiança.

WaveOne® Gold

Desenvolvido com a mais nova tecnologia reciprocante

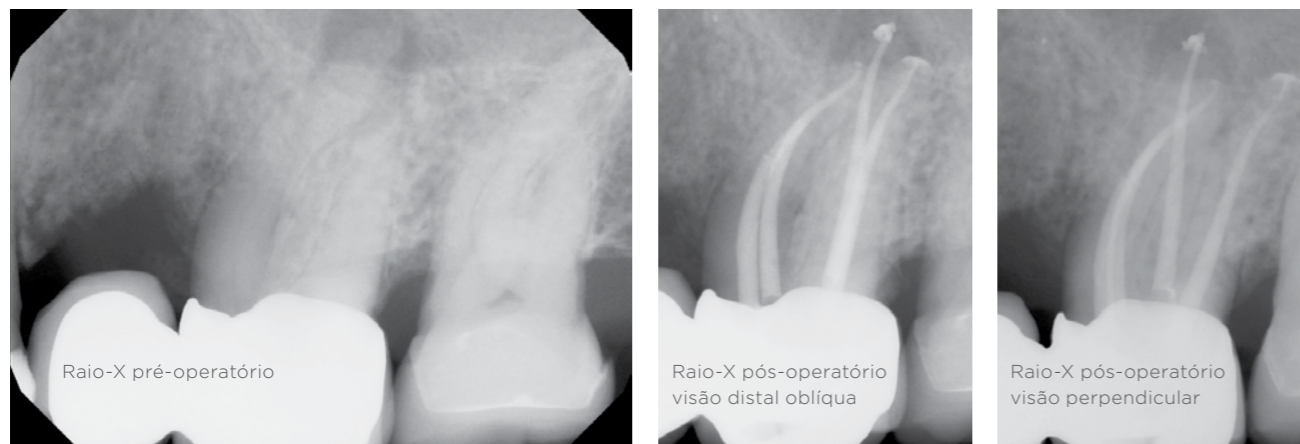

Cortesia do Dr. J. Webber

Os dentistas que desenvolveram afirmam: Instrumentar o canal nunca foi tão fácil.

WaveOne® se tornou referência em instrumentação de canais radiculares, desde 2011. Profissionais ao redor do mundo demonstraram grande satisfação com a simplicidade e qualidade com a linha. Iniciou-se um novo e excitante projeto para levar até vocês a Wave One® Gold, uma linha com uma avançada metalurgia, melhorando o conceito de lima única. Além disso, otimizamos os diâmetros apicais, conicidade e secção transversal, sendo, mais segura, eficiente e flexível. Wave One® Gold leva a simplicidade e o tratamento endodôntico a um nível superior.

Uma solução completa

A família de produtos WaveOne® Gold promove uma opção de tratamento completo com confiança e garantia de preparos padronizados.

Motores	X-Smart Plus e X-Smart IQ™ são pré-programados com o sistema WaveOne® Gold, para sua simplicidade
Pré-alargamento	A WaveOne® Glider otimiza o seu pré-alargamento antes da instrumentação com WaveOne® Gold Primary
Instrumentação	As limas WaveOne® Gold para instrumentação estão disponíveis em 4 tamanhos com 3 comprimentos de trabalho (21, 25 e 31mm) para tratar a maioria dos casos
Obturação	Produtos WaveOne® Gold para obturação possuem as mesmas características dos instrumentos, facilitando o término do tratamento.

WaveOne® Gold

Simplicidade que permite o foco no tratamento

A maioria dos canais pode ser preparado somente com a WaveOne® Gold Primary

WaveOne® Gold 020 7% Small


025 7% Primary

recomendada para maioria dos casos

035 6% Medium

045 5% Large

ISO color coded

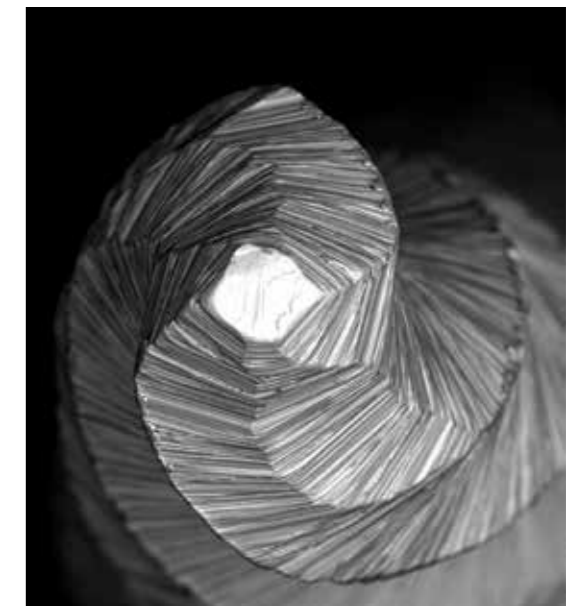

Pronta para Uso + Uso único



A maioria dos profissionais deseja reduzir os custos do tratamento endodôntico e, ao mesmo tempo, aumentar sua segurança e eficiência. Para atender essa demanda, WAVEONE® GOLD é apresentada em blisters esterilizados.

Os profissionais se beneficiarão de:

- Simplicidade: embalagem esterilizada pronta para o uso do profissional;
- Aumento da segurança do instrumento, que será utilizado sempre novo e com resistência à fadiga otimizada;
- Ausência do risco de contaminação cruzada entre pacientes;
- Eficiência de corte maximizada.


Pontas otimizadas

Conicidade variada

Tratamento térmico GOLD

Secção transversal

Movimento Reciprocante

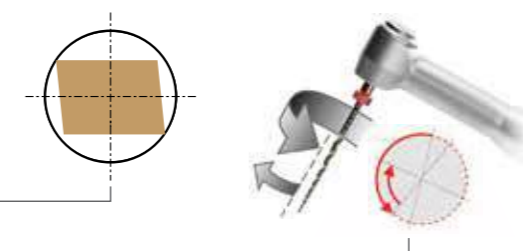

WaveOne® Gold

A simplicidade de WaveOne®, com benefícios que valem ouro

Segurança reforçada para o paciente

- A lima WaveOne® Gold Primary é 50% mais resistente à fadiga cíclica do que a lima WaveOne® Primary.
- Redução do efeito de aparafusamento comparado aos sistemas rotatórios convencionais.


Cobertura de ampla* variedade anatômica de canais

- Tecnologia GOLD garante maior flexibilidade à lima.
- Linha de tamanhos estendida (Small, Primary, Medium, Large).


Redução do tempo de preparo do canal

- Maior eficiência de corte do instrumento.
- A utilização de apenas 1 lima reduz tempo de instrumentação do canal.


Resistência à fadiga cíclica **

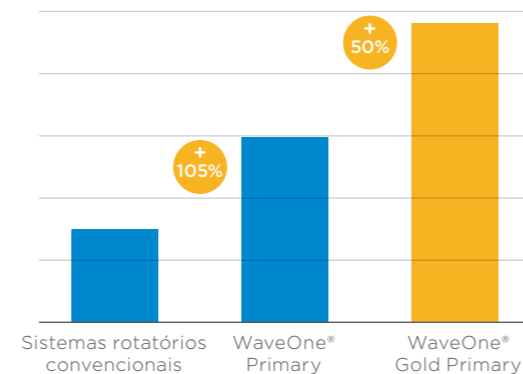

Flexibilidade **

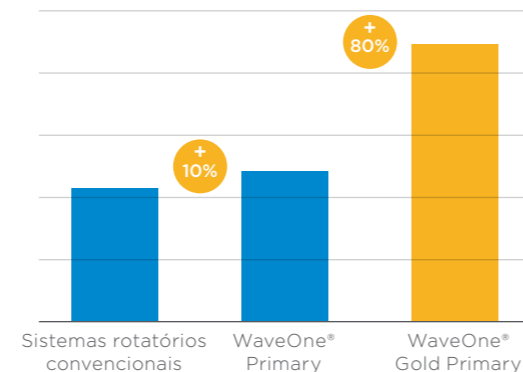

Tempo de trabalho **

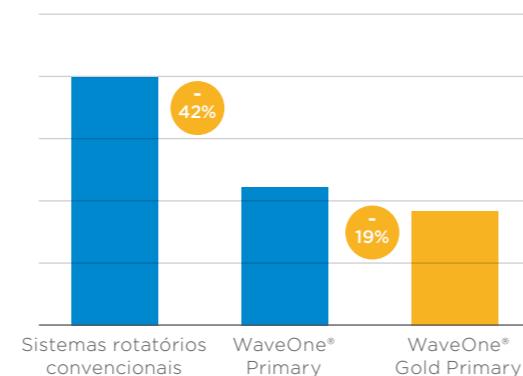

*comparado com WaveOne®
**resultados de testes laboratoriais internos

WaveOne® Gold Glider

Realize o pré-alargamento com confiança


A nova lima de pré-alargamento foi desenvolvida em colaboração com o time de experts em endodontia: Dr E. Berrutti, Dr G. Cantatore, Dr A. Castellucci, Dr S. Kuttler, Dr W. Pertot, Dr C. Ruddle, Dr J. Webber, Dr J. West.

Otimize a etapa de instrumentação com apenas uma lima de pré alargamento recíprocante, parte da solução WaveOne® Gold.


- Respeita a curvatura natural do canal
- Maior segurança ao paciente, graças a sua flexibilidade e resistência a fadiga cíclica
- Estéril e pronto para uso único, preservando a eficiência de corte, redução de fratura e contaminação cruzada

A WaveOne® Gold Glider deve ser utilizada apenas em movimento recíprocante e em motores compatível com os instrumentos Dentsply Sirona.

Menor resistência à flexão comparada a lima Pathfile para uma maior flexibilidade graças ao tratamento térmico ouro**

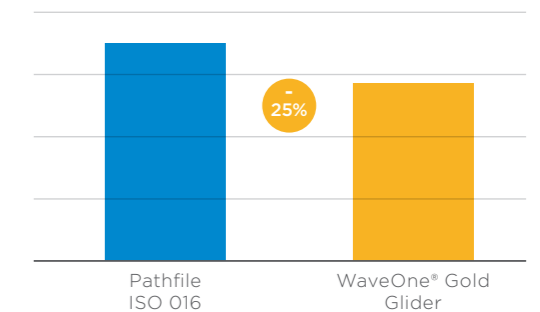

Melhor resistência a fadiga cíclica**

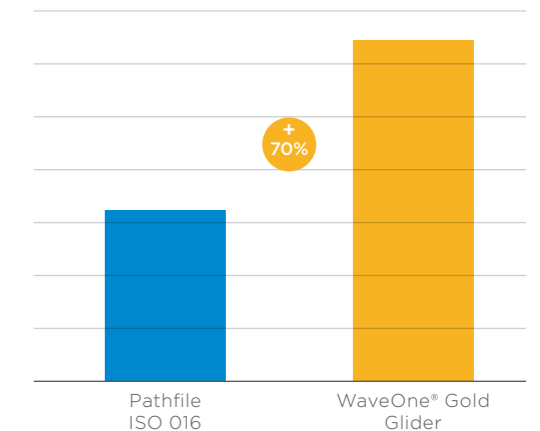

Uma sequência para a maioria dos seus casos

Exploração

ReadySteel®



010 02 - 25mm

Pré-alargamento

WaveOne® Gold Glider



015 02 - 25mm
Taper variável


Instrumentação

WaveOne® Gold



Size Primary
025 07 - 25mm
Taper variável

Mesma secção transversal que as limas de instrumentação WaveOne® Gold

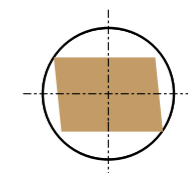

**resultados de testes laboratoriais internos


WaveOne® Gold Guta-Percha

A guta-percha de qualidade ouro que você estava esperando

Guta-Percha

Ponta de guta-percha com conicidade variada, especialmente desenvolvida para adaptar-se ao canal preparado com WaveOne® Gold.

Volume superior de preenchimento apical da ponta de guta-percha**

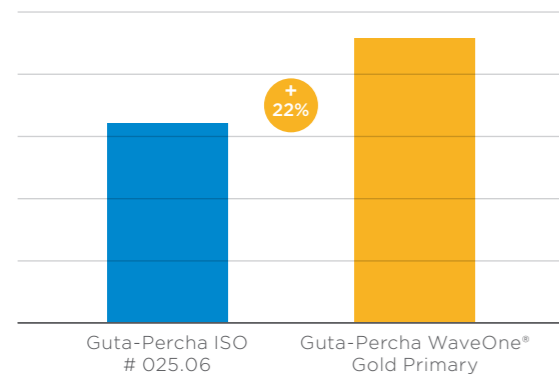

WaveOne® Gold

Seleção expandida dos produtos correspondentes

WaveOne® Gold oferece a conveniência de toda uma família de produtos projetados para trabalharem juntos, desde o início.

Família de produtos WaveOne® Gold



Família de produtos WaveOne® Gold com o novo branding Dentsply Sirona



**resultados de testes laboratoriais internos