

Ceramic SLI

Self Ligating Interactive



A PRATICIDADE DA TÉCNICA AUTOLIGÁVEL ALIADA À ELEGÂNCIA DA PURA CERÂMICA DE ALUMINA

CLIP DE NITINOL


A liga de níquel titânio possui memória elástica, sendo capaz de resistir a deformações mecânicas durante todo o tratamento. Devido à memória geométrica do material, o Clip sempre tenderá retornar à sua posição original, garantindo melhor leitura de torque.

ACABAMENTO FOSCO

Para complementar a estética da peça o Clip possui acabamento fosco, e por não se tratar de uma cobertura, não descasca e permanece inalterado até o final do tratamento.

MECANISMO SIMPLES E PRÁTICO

Dispensa o uso de ferramentas ou alicates especiais.

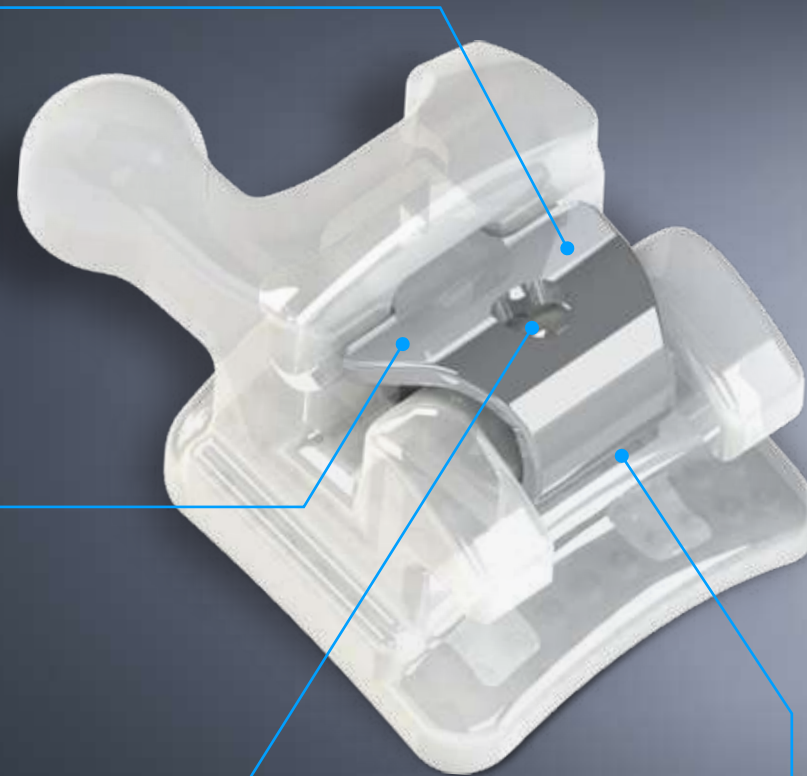

SISTEMA ANTI-TRAVA

Projetado especialmente para evitar o travamento do Clip pelo acúmulo de placa e tártaro.

MÁXIMO CONFORTO

Por possuir dimensões reduzidas e contornos arredondados.


ESTÉTICA SUPERIOR

Injetados em pura cerâmica de alumina, os bráquetes são fabricados pela mais moderna Tecnologia CIM (Ceramic Injection Molding). As propriedades de translucência da peça garantem uma estética superior e melhor adaptação as tonalidades de dentes.

EXCELENTE ADAPTAÇÃO E RETENÇÃO

Com geometria otimizada, a base possui curvaturas méseo-distal e cérvico-oclusal, que garantem melhor adaptação ao dente.

A base é bijateada e silanizada, garantindo uma excelente retenção, tanto mecânica quanto química.

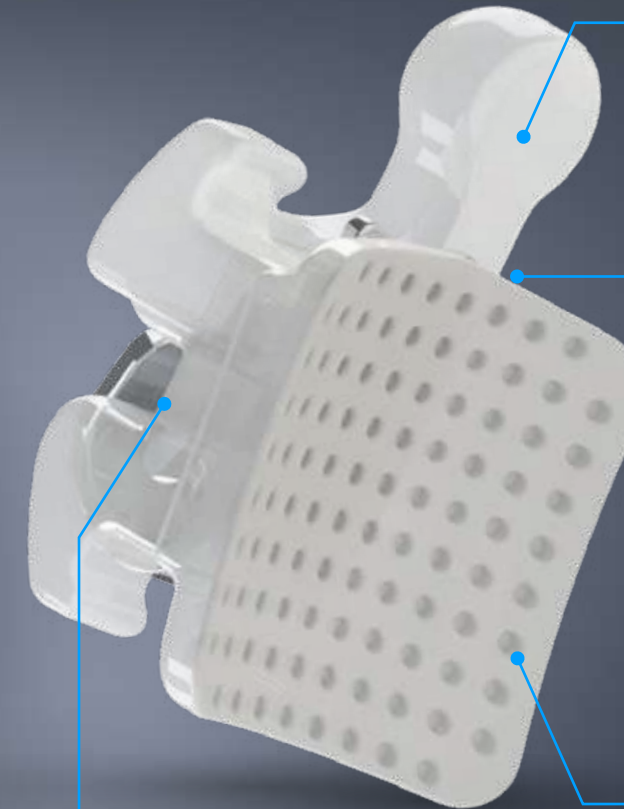

DESLIZE OTIMIZADO

Slot com alívio de curvatura e extremidades arredondadas.

SISTEMA INTERATIVO

O Ceramic SLI é um bráquete autoligado interativo, pois apresenta dualidade de ação passiva ou ativa, atuando passivamente com fios de calibres mais finos e ativamente com fios mais calibrosos. Isso resulta em um alinhamento e nivelamento mais acelerado devido ao baixo atrito, e na leitura de torque quando o fio toca o Clip.



Cód. Kit: 10.12.900
Prescrição Roth
Slot .022"

Peças 4 e 5 inferiores metálicas para melhor resistência aos esforços de mastigação.
Maior segurança durante o tratamento, evitando descolagens indesejadas.

DICAS IMPORTANTES

- Para uma colagem segura e eficaz, utilize Orthoprimer (ref. 85.01.016) e Orthobond Plus (ref.85.01.017).
- O uso de Orthoprimer na base da peça e no dente é imprescindível à colagem de peças estéticas Morelli.
- Recomendamos seguir as orientações de nosso Manual de Colagem Direta em www.morelli.com.br/loja/catalogobrindes.
- Ao colar, remova o excesso de adesivo para não obstruir o clip.

MORELLI

www.morelli.com.br

0800 121455 / 0800 7031455

©2019 - Todos os direitos reservados. Dental Morelli Ltda.