

Português

Instrução de Uso: IFU-00018 - 0012

MS/ANVISA nº: 10396830037

Nome Técnico ANVISA: Componentes para Ortodontia

Nome Comercial da Família ANVISA: BRÁQUETES, BANDAS E TUBOS

Importante: Para consultar a Instrução de Uso, verifique a versão indicada no rótulo do produto juntamente com o código, e acesse o arquivo digital em www.morelli.com.br/IFU. Para obter a Instrução de Uso impressa, sem custo de emissão e envio, favor entrar em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente através do telefone 0800 0121455 / 0800 7031455 ou pelo e-mail sac@morelli.com.br. Para composições químicas solicite a Folha de Segurança do produto.

**Fabricado por:**

Dental Morelli Ltda.

Alameda Jundiá, 230/250 - Jardim Saira

CEP/ ZIP Code: 18085-090 Sorocaba - SP Brasil

Tel.: +55(15)3328-8200 / 0800 0121455 / 0800 7031455

Responsável Técnico : Roger Morelli CREA-SP 5060214985



Representante Europeu


Nuno Flores

Al. Bonifácio Lázaro Lozano, 3 Piso / Floor O - C

Oeiras - Portugal - 2780125

Tel.: 351 21 4439292

Bráquetes Metálicos

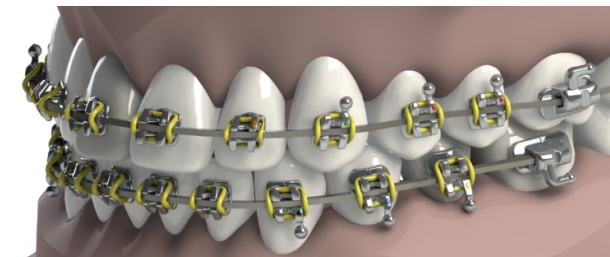

Colado na superfície vestibular dos dentes, o Bráquete tem a finalidade principal de alojar o arco intraoral, sendo que ambos determinam os esforços transmitidos aos elementos dentários corrigindo seu posicionamento durante o tratamento dentário.

Finalidade Prevista

A finalidade prevista dos Bráquetes Ortodônticos é a correção do posicionamento dos dentes e da oclusão dentária por meio da aplicação de forças controladas, promovendo o alinhamento dentário. Eles fazem parte de um sistema ortodôntico que inclui fios, ligaduras e outros acessórios, sendo utilizados para tratamentos corretivos e preventivos.

Indicação de uso:

a) Classificação de Angle:

- Classe I
- Classe II
- Classe III

b) Problemas nos dentes e ossos:

- Apinhamento;
- Diastema;
- Mordida aberta;
- Mordida cruzada anterior;
- Mordida cruzada posterior;
- Mordida profunda;
- Prognatismo;
- Retrognatismo.

Indicação de Paciente: todas as idades com indicação de tratamento ortodôntico.

Usuário Pretendido: uso e instalação por profissional qualificado em ortodontia.

Manuseio:

Recomendamos a utilizar a “**Pinça ortodôntica**” (ref. 75.01.022 ou ref. 75.01.064).

Colagem:

Utilize **Orthoprimer** e **Orthobond** para uma colagem eficaz.

Siga as recomendações do “**Manual de Colagem Direta**” em www.morelli.com.br/IFU

Advertência de colagem:

Todos os produtos destinados à colagem possuem jateamento e descontaminação criteriosa das bases.

Não toque as superfícies de adesão antes de aplicar primer/adesivo, pois qualquer contato pode provocar contaminação, causando falhas na interface adesiva.

Não utilize métodos de desinfecção e esterilização na base, pois podem contaminá-las ou comprometê-las, causando falha do sistema de retenção.

Não realize jateamentos, limpezas ou aplicação de outros tipos de silano na base de qualquer peça, pois o tratamento de superfície ideal já é feito durante a fabricação. Portanto, apenas o Orthoprimer deve ser aplicado no esmalte ou na base da peça antes da colagem.

Em caso de contaminação na base, descartar e substituir a peça.

Proceder com o isolamento adequado no momento da colagem, evitando a contaminação por sangue ou saliva.

Evite colar o produto com interferência na oclusão para impedir que haja desgaste na superfície dentária ou descolamento prematuro.

Recomenda-se colar um dente por vez. Preparar dentes simultaneamente aumenta o risco de falhas pela contaminação por saliva, fotopolimerização antecipada do primer no dentes adjacentes, etc.

Na colagem utilize sempre adesivos ortodônticos, que promovem melhor adesão e facilitam a remoção do adesivo residual do dente, preservando seu esmalte. Resinas não ortodônticas são mais densas, penetram menos na base e dificultam sua remoção do dente e consomem mais brocas.

Recomenda-se aplicar um filme mínimo suficiente para cobrir a superfície do esmalte e da base das peças. Remover eventual excesso de Orthoprimer com jato de ar, no sentido gengival, evitando comprometer a área de colagem com saliva. Orthoprimer em excesso compromete a colagem e pode fazer com que a peça saia da posição até a fotopolimerização.

A fotopolimerização prévia do Orthoprimer compromete sua adesão ao adesivo.

Remoção:

Utilizar instrumento de remoção de bráquetes.

Contraindicações:

A Morelli fornece os produtos apenas a profissionais qualificados. É de inteira responsabilidade do ortodontista identificar condições que possam ser contraindicadas para o tratamento, tais como:

- Pacientes com deficiência na higiene bucal.
- Pacientes incapazes de cooperar com o tratamento.
- Pacientes com ambiente bucal propício a desmineralização do esmalte dentário.
- Alergia a qualquer um dos materiais do aparelho ortodôntico.
- Doenças ou outras condições pré-existentes que possam dificultar o tratamento ortodôntico.
- Reabsorção radicular.
- Reabsorção óssea existente.

- Descalcificação existente no esmalte dentário.
- Uso em ambiente de Ressonância Magnética.

Efeitos colaterais:

É da inteira responsabilidade do profissional qualificado identificar qualquer risco e/ou contraindicação que possa surgir durante o tratamento, e comunicar ao paciente a possibilidade de qualquer efeito colateral indesejado. Durante o tratamento, efeitos colaterais indesejados podem incluir:

- Danos na mucosa oral e língua;
- Dificuldade ao falar ou mastigar;
- Descoloração de dentes;
- Descalcificação;
- Reabsorção radicular;
- Complicações periodontais;
- Reações alérgicas;
- Dificuldades na manutenção da higiene oral;
- Dor;
- Desconforto;
- Sensibilidade.

Composição / Informação sobre os componentes:

Aço inoxidável 17-4PH

(Cu: 3,0 - 5,0 / Cr: 15,0 - 17,5 / Ni: 3,0 - 5,0 / C: $\leq 0,07$ / Mn: $\leq 1,5$ / Si: $\leq 0,7$ / Nb+Ta: 0,15 - 0,45 / Fe: restante)

P.A.N.A.C.E.A.

(Cr: 16,5 - 17,5 / C: $\leq 0,20$ / Mn: 9,0 - 12,0 / Si: $\leq 1,0$ / Mo: 3,0 - 3,5 / N: 0,25 - 0,90 / S: $\leq 0,03$ / Fe: restante)

Aço inoxidável 303Cu

(C: $\leq 0,15$ / Mn: $\leq 3,0$ / Si: $\leq 1,0$ / Mo: $\leq 0,60$ / P: $\leq 0,045$ / Cr: 17,0 - 19,0 / Ni: 8,0 - 10,0 / Cu: 1,5 - 3,0 / S: $\leq 0,15$ / Fe: restante)

Aço inoxidável 304

(C: $\leq 0,08$ / Mn: $\leq 2,0$ / Si: $\leq 1,0$ / P: $\leq 0,045$ / Cr: 17,5 - 20,0 / Ni: 8,0 - 10,5 / S: $\leq 0,03$ / N: $\leq 0,10$ / Fe: restante)

Solda Prata BAg-4

(Ag: 39,0 - 41,0 / Cu: 29,0 - 31,0 / Ni: 1,5 - 2,5 / Zn: 26,0 - 30,0)

Validade:

120 meses.

Advertências:

Não toque nos bráquetes com pontas ultrassônicas: pode ocasionar fraturas e descolamentos.

Oriento o paciente a NÃO MASTIGAR OU MORDER ALIMENTOS DUROS durante o tratamento ortodôntico, para que não haja descolamento prematuro.



A presença deste produto pode produzir um artefato de imagem em exame de Ressonância Magnética de Imagem na região da cabeça e/ou pescoço. Pode ser necessária alguma manipulação dos parâmetros de varredura para compensar o artefato ou a retirada do mesmo, conforme conduta determinada pelo profissional de saúde, laboratório ou hospital.



Este produto contém Níquel e Cromo. Uma pequena porcentagem da população é alérgica a estes metais. Caso ocorram reações alérgicas, oriente o paciente a procurar um médico.



Produto não reutilizável, pois o seu reuso pode causar infecção cruzada, diminuição da eficiência na colagem e perda de propriedades mecânicas devido ao desgaste natural.

Em caso de problemas graves decorrentes do uso do produto, é importante que o profissional qualificado e/ou paciente informem ao fabricante e a autoridade competente do país em que reside.

O produto é fornecido na condição não esterilizado, contudo possui biocompatibilidade comprovada não sendo necessárias medidas de limpeza, desinfecção ou esterilização, desde que a embalagem não tenha sido violada. Caso o produto, antes do uso, entre em contato com superfícies ou substâncias diferentes do propósito de uso, recomenda-se descartar o mesmo. O produto não deve ser reutilizado ou reprocessado.

Não utilizar o produto caso a sua embalagem esteja danificada ou aberta, de modo a minimizar possíveis perigos relacionados à transmissão de microrganismos ou a possível falsificação de produtos.

O uso deste dispositivo é considerado seguro quando utilizado conforme a instrução de uso. Em caso de situações de emergência médica, cabe ao profissional qualificado orientar seus pacientes do risco de aspiração e deglutição na hipótese de quebra/desprendimento das peças; reação alérgica aos materiais do dispositivo; sinais de infecção no local de instalação; e qualquer outra condição inesperada que possa representar risco à saúde do usuário. Nestes casos, a interrupção do uso (remoção do dispositivo) é recomendada após avaliação do profissional qualificado.

Produto para aplicação exclusiva por profissional qualificado em ortodontia, o uso por pessoas sem conhecimento técnico necessário poderá ocasionar movimentação dentária indesejada, perda óssea, perda do elemento dentário, fenestração, recesso gengival ou deiscência de raiz.

Cabe ao profissional qualificado em orientar o paciente sobre a correta higienização bucal, de modo a evitar o surgimento de placa bacteriana e tártaro ou ainda doenças como inflamação gengival (gengivite), periodontite ou até mesmo endocardite.

Considerando que o produto é utilizado em contato com mucosa e fluídos corporais, recomenda-se ao profissional aplicar as boas práticas clínicas para o descarte de produtos médicos conforme normas sanitárias vigentes.

ATENÇÃO:

A Morelli não se responsabiliza pelos resultados obtidos pela aplicação do produto sem as devidas precauções ou inobservância das advertências.

Códigos:

Slot .018" = 0,46 mm / Slot .022" = 0,56 mm

¹ Organismo Certificador

Código	Prescrição	SD	SE	IE	ID	Comp	Torque	Ângulo	Slot	CE	Org¹
10.10.100	Roth	11	-	-	-	3,9mm	+12° TORQ.	+5° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.101	Roth	-	21	-	-	3,9mm	+12° TORQ.	+5° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.102	Roth	12	-	-	-	2,9mm	+8° TORQ.	+9° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.103	Roth	-	22	-	-	2,9mm	+8° TORQ.	+9° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.104	Roth	13	-	-	-	3,2mm	-2° TORQ.	+13° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.105	Roth	-	23	-	-	3,2mm	-2° TORQ.	+13° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.108	Roth	15 14	24 25	-	-	3,2mm	-7° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.112	Roth	-	-	-	43	3,2mm	-11° TORQ.	+7° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.113	Roth	-	-	33	-	3,2mm	-11° TORQ.	+7° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.114	Roth	-	-	34	44	3,2mm	-17° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.116	Roth	-	-	35	45	3,2mm	-22° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.120	Roth	13	-	-	-	3,2mm	-2° TORQ.	+13° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.121	Roth	-	23	-	-	3,2mm	-2° TORQ.	+13° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.126	Roth	-	-	-	43	3,2mm	-11° TORQ.	+7° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.127	Roth	-	-	33	-	3,2mm	-11° TORQ.	+7° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.200	Roth	11	-	-	-	3,9mm	+12° TORQ.	+5° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.201	Roth	-	21	-	-	3,9mm	+12° TORQ.	+5° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.202	Roth	12	-	-	-	2,9mm	+8° TORQ.	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.203	Roth	-	22	-	-	2,9mm	+8° TORQ.	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.204	Roth	13	-	-	-	3,2mm	-2° TORQ.	+13° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.205	Roth	-	23	-	-	3,2mm	-2° TORQ.	+13° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.206	Roth	13	-	-	-	3,2mm	-2° TORQ.	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.207	Roth	-	23	-	-	3,2mm	-2° TORQ.	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.208	Roth	15 14	24 25	-	-	2,5mm	-7° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.212	Roth	-	-	-	43	3,2mm	-11° TORQ.	+7° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.213	Roth	-	-	33	-	3,2mm	-11° TORQ.	+7° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.214	Roth	-	-	34	44	2,7mm	-17° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.216	Roth	-	-	35	45	2,7mm	-22° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.220	Roth	13	-	-	-	3,2mm	-2° TORQ.	+13° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.221	Roth	-	23	-	-	3,2mm	-2° TORQ.	+13° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.222	Roth	13	-	-	-	3,2mm	-2° TORQ.	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.223	Roth	-	23	-	-	3,2mm	-2° TORQ.	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.224	Roth	15 14	-	-	-	2,9mm	-7° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.225	Roth	-	24 25	-	-	2,9mm	-7° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.226	Roth	-	-	-	43	3,2mm	-11° TORQ.	+7° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.227	Roth	-	-	33	-	3,2mm	-11° TORQ.	+7° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.228	Roth	-	-	-	44	2,9mm	-17° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797

Código	Prescrição	SD	SE	IE	ID	Comp	Torque	Ângulo	Slot	CE	Org'
10.10.229	Roth	-	-	34	-	2,9mm	-17° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.230	Roth	-	-	-	45	2,9mm	-22° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.231	Roth	-	-	35	-	2,9mm	-22° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.300	Roth	11	-	-	-	3,2mm	+12° TORQ.	+5° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.301	Roth	-	21	-	-	3,2mm	+12° TORQ.	+5° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.302	Roth	12	-	-	-	2,5mm	+8° TORQ.	+9° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.303	Roth	-	22	-	-	2,5mm	+8° TORQ.	+9° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.304	Roth	13	-	-	-	2,7mm	-2° TORQ.	+13° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.305	Roth	-	23	-	-	2,7mm	-2° TORQ.	+13° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.308	Roth	15 14	24 25	-	-	2,9mm	-7° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.310	Roth	-	-	31 32	42 41	2,3mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.312	Roth	-	-	-	43	2,7mm	-11° TORQ.	+7° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.313	Roth	-	-	33	-	2,7mm	-11° TORQ.	+7° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.314	Roth	-	-	34	44	2,9mm	-17° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.316	Roth	-	-	35	45	2,9mm	-22° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.320	Roth	13	-	-	-	2,7mm	-2° TORQ.	+13° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.321	Roth	-	23	-	-	2,7mm	-2° TORQ.	+13° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.324	Roth	15 14	-	-	-	2,9mm	-7° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.325	Roth	-	24 25	-	-	2,9mm	-7° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.326	Roth	-	-	-	43	2,7mm	-11° TORQ.	+7° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.327	Roth	-	-	33	-	2,7mm	-11° TORQ.	+7° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.328	Roth	-	-	-	44	2,9mm	-17° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.329	Roth	-	-	34	-	2,9mm	-17° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.330	Roth	-	-	-	45	2,9mm	-22° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.331	Roth	-	-	35	-	2,9mm	-22° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.400	Roth	11	-	-	-	3,2mm	+12° TORQ.	+5° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.401	Roth	-	21	-	-	3,2mm	+12° TORQ.	+5° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.402	Roth	12	-	-	-	2,5mm	+8° TORQ.	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.403	Roth	-	22	-	-	2,5mm	+8° TORQ.	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.404	Roth	13	-	-	-	2,7mm	-2° TORQ.	+13° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.405	Roth	-	23	-	-	2,7mm	-2° TORQ.	+13° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.406	Roth	13	-	-	-	2,7mm	-2° TORQ.	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.407	Roth	-	23	-	-	2,7mm	-2° TORQ.	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.408	Roth	15 14	24 25	-	-	2,5mm	-7° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.410	Roth	-	-	31 32	42 41	2,3mm	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.412	Roth	-	-	-	43	2,7mm	-11° TORQ.	+7° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.413	Roth	-	-	33	-	2,7mm	-11° TORQ.	+7° ANG.	.022"	C E	2797

Código	Prescrição	SD	SE	IE	ID	Comp	Torque	Ângulo	Slot	CE	Org'
10.10.414	Roth	-	-	34	44	2,7mm	-17° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.416	Roth	-	-	35	45	2,7mm	-22° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.420	Roth	13	-	-	-	2,7mm	-2° TORQ.	+13° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.421	Roth	-	23	-	-	2,7mm	-2° TORQ.	+13° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.422	Roth	13	-	-	-	2,7mm	-2° TORQ.	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.423	Roth	-	23	-	-	2,7mm	-2° TORQ.	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.424	Roth	15 14	-	-	-	2,9mm	-7° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.425	Roth	-	24 25	-	-	2,9mm	-7° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.426	Roth	-	-	-	43	2,7mm	-11° TORQ.	+7° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.427	Roth	-	-	33	-	2,7mm	-11° TORQ.	+7° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.428	Roth	-	-	-	44	2,9mm	-17° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.429	Roth	-	-	34	-	2,9mm	-17° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.430	Roth	-	-	-	45	2,9mm	-22° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.431	Roth	-	-	35	-	2,9mm	-22° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.432	Roth	-	-	-	42	2,2mm	+10° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.433	Roth	-	-	32	-	2,2mm	+10° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.434	Roth	11	-	-	-	3,2mm	0° TORQ.	+5° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.435	Roth	-	21	-	-	3,2mm	0° TORQ.	+5° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.436	Roth	12	-	-	-	2,5mm	0° TORQ.	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.437	Roth	-	22	-	-	2,5mm	0° TORQ.	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.438	Roth	-	-	31 32	42 41	2,2mm	+10° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.900	Roth	13	23	-	-	-	-	+13° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.901	Roth	13	23	-	-	-	-	+13° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.906	Roth	13	23	-	-	-	-	+13° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.907	Roth	13	23	-	-	-	-	+13° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.911	Roth	13	23	-	-	-	-	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.915	Roth	13	23	-	-	-	-	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.920	Roth	13	23	-	-	-	-	+13° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.950	Roth	13	23	-	-	-	-	+13° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.951	Roth	13	23	-	-	-	-	+13° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.953	Roth	13	23	-	-	-	-	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.960	Roth	13	23	-	-	-	-	+13° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.961	Roth	13	23	-	-	-	-	+13° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.963	Roth	13	23	-	-	-	-	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.969	Roth	13	23	-	-	-	-	+13° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.971	Roth	13	23	-	-	-	-	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.978	Roth	13	23	-	-	-	-	+13° ANG.	.018"	C E	2797

Código	Prescrição	SD	SE	IE	ID	Comp	Torque	Ângulo	Slot	CE	Org¹
10.10.979	Roth	13	23	-	-	-	-	+13° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.981	Roth	13	23	-	-	-	-	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.996	Roth	13	23	-	-	-	-	+13° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.997	Roth	13	23	-	-	-	-	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.200	Roth	11	-	-	-	3,2mm	+12° TORQ.	+5° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.201	Roth	-	21	-	-	3,2mm	+12° TORQ.	+5° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.202	Roth	12	-	-	-	2,5mm	+8° TORQ.	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.203	Roth	-	22	-	-	2,5mm	+8° TORQ.	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.204	Roth	13	-	-	-	2,7mm	-2° TORQ.	+13° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.205	Roth	-	23	-	-	2,7mm	-2° TORQ.	+13° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.206	Roth	15 14	-	-	-	2,5mm	-7° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.207	Roth	-	24 25	-	-	2,5mm	-7° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.208	Roth	-	-	31 32	42 41	2,3mm	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.210	Roth	-	-	-	43	2,6mm	-11° TORQ.	+7° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.211	Roth	-	-	33	-	2,6mm	-11° TORQ.	+7° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.212	Roth	-	-	-	44	2,5mm	-17° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.213	Roth	-	-	34	-	2,5mm	-17° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.214	Roth	-	-	-	45	2,5mm	-22° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.215	Roth	-	-	35	-	2,5mm	-22° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.300	Roth	11	-	-	-	3,2mm	+12° TORQ.	+5° ANG.	.018"	C E	2797
10.15.301	Roth	-	21	-	-	3,2mm	+12° TORQ.	+5° ANG.	.018"	C E	2797
10.15.302	Roth	12	-	-	-	2,5mm	+8° TORQ.	+9° ANG.	.018"	C E	2797
10.15.303	Roth	-	22	-	-	2,5mm	+8° TORQ.	+9° ANG.	.018"	C E	2797
10.15.305	Roth	13	-	-	-	2,9mm	-2° TORQ.	+13° ANG.	.018"	C E	2797
10.15.307	Roth	-	23	-	-	2,9mm	-2° TORQ.	+13° ANG.	.018"	C E	2797
10.15.309	Roth	13	-	-	-	2,9mm	-2° TORQ.	+9° ANG.	.018"	C E	2797
10.15.311	Roth	-	23	-	-	2,9mm	-2° TORQ.	+9° ANG.	.018"	C E	2797
10.15.313	Roth	15 14	-	-	-	2,9mm	-7° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.15.315	Roth	-	24 25	-	-	2,9mm	-7° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.15.316	Roth	-	-	31 32	42 41	2,3mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.15.318	Roth	-	-	-	43	2,9mm	-11° TORQ.	+7° ANG.	.018"	C E	2797
10.15.320	Roth	-	-	33	-	2,9mm	-11° TORQ.	+7° ANG.	.018"	C E	2797
10.15.322	Roth	-	-	-	44	2,9mm	-17° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.15.324	Roth	-	-	34	-	2,9mm	-17° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.15.326	Roth	-	-	-	45	2,9mm	-22° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.15.328	Roth	-	-	35	-	2,9mm	-22° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.15.400	Roth	11	-	-	-	3,2mm	+12° TORQ.	+5° ANG.	.022"	C E	2797

Código	Prescrição	SD	SE	IE	ID	Comp	Torque	Ângulo	Slot	CE	Org¹
10.15.401	Roth	-	21	-	-	3,2mm	+12° TORQ.	+5° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.402	Roth	12	-	-	-	2,5mm	+8° TORQ.	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.403	Roth	-	22	-	-	2,5mm	+8° TORQ.	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.405	Roth	13	-	-	-	2,9mm	-2° TORQ.	+13° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.407	Roth	-	23	-	-	2,9mm	-2° TORQ.	+13° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.409	Roth	13	-	-	-	2,9mm	-2° TORQ.	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.411	Roth	-	23	-	-	2,9mm	-2° TORQ.	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.413	Roth	15 14	-	-	-	2,9mm	-7° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.415	Roth	-	24 25	-	-	2,9mm	-7° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.416	Roth	-	-	31 32	42 41	2,3mm	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.418	Roth	-	-	-	43	2,9mm	-11° TORQ.	+7° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.420	Roth	-	-	33	-	2,9mm	-11° TORQ.	+7° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.422	Roth	-	-	-	44	2,9mm	-17° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.424	Roth	-	-	34	-	2,9mm	-17° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.426	Roth	-	-	-	45	2,9mm	-22° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.428	Roth	-	-	35	-	2,9mm	-22° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.501	Roth	11	-	-	-	3,2mm	+12° TORQ.	+5° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.502	Roth	-	21	-	-	3,2mm	+12° TORQ.	+5° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.503	Roth	12	-	-	-	2,5mm	+8° TORQ.	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.504	Roth	-	22	-	-	2,5mm	+8° TORQ.	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.505	Roth	13	-	-	-	2,6mm	-2° TORQ.	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.506	Roth	-	23	-	-	2,6mm	-2° TORQ.	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.509	Roth	15 14	-	-	-	2,5mm	-7° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.510	Roth	-	24 25	-	-	2,5mm	-7° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.511	Roth	-	-	31 32	42 41	2,2mm	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.512	Roth	-	-	-	43	2,6mm	-11° TORQ.	+7° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.513	Roth	-	-	33	-	2,6mm	-11° TORQ.	+7° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.514	Roth	-	-	-	44	2,5mm	-17° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.515	Roth	-	-	34	-	2,5mm	-17° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.516	Roth	-	-	-	45	2,5mm	-22° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.517	Roth	-	-	35	-	2,5mm	-22° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.723	Roth	-	-	-	-	-	-	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.725	Roth	-	-	-	-	-	-	+13° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.901	Roth	13	23	-	-	-	-	+13° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.902	Roth	13	23	-	-	-	-	+9° ANG.	.018"	C E	2797
10.15.903	Roth	13	23	-	-	-	-	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.904	Roth	13	23	-	-	-	-	+13° ANG.	.018"	C E	2797

Código	Prescrição	SD	SE	IE	ID	Comp	Torque	Ângulo	Slot	CE	Org'
10.15.905	Roth	13	23	-	-	-	-	+13° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.906	Roth	13	23	-	-	-	-	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.922	Roth	13	23	-	-	-	-	+9° ANG.	.018"	C E	2797
10.15.923	Roth	13	23	-	-	-	-	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.924	Roth	13	23	-	-	-	-	+13° ANG.	.018"	C E	2797
10.15.925	Roth	13	23	-	-	-	-	+13° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.930	Roth	13	23	-	-	-	-	+9° ANG.	.018", .022"	C E	2797
10.15.932	Roth	13	23	-	-	-	-	+9° ANG.	.018"	C E	2797
10.15.933	Roth	13	23	-	-	-	-	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.934	Roth	13	23	-	-	-	-	+13° ANG.	.018"	C E	2797
10.15.935	Roth	13	23	-	-	-	-	+13° ANG.	.022"	C E	2797
10.19.101	Capellozza	11	-	-	-	3,2mm	+7° TORQ.	+5° ANG.	.022"	-	-
10.19.102	Capellozza	-	21	-	-	3,2mm	+7° TORQ.	+5° ANG.	.022"	-	-
10.19.103	Capellozza	12	-	-	-	2,5mm	+3° TORQ.	+9° ANG.	.022"	-	-
10.19.104	Capellozza	-	22	-	-	2,5mm	+3° TORQ.	+9° ANG.	.022"	-	-
10.19.105	Capellozza	13	-	-	-	2,9mm	-5° TORQ.	+8° ANG.	.022"	-	-
10.19.106	Capellozza	-	23	-	-	2,9mm	-5° TORQ.	+8° ANG.	.022"	-	-
10.19.107	Capellozza	15 14	-	-	-	2,9mm	-7° TORQ.	0° ANG.	.022"	-	-
10.19.108	Capellozza	-	24 25	-	-	2,9mm	-7° TORQ.	0° ANG.	.022"	-	-
10.19.109	Capellozza	-	-	-	42 41	2,3mm	-1° TORQ.	+2° ANG.	.022"	-	-
10.19.110	Capellozza	-	-	31 32	-	2,3mm	-1° TORQ.	+2° ANG.	.022"	-	-
10.19.111	Capellozza	-	-	-	43	2,9mm	-11° TORQ.	+5° ANG.	.022"	-	-
10.19.112	Capellozza	-	-	33	-	2,9mm	-11° TORQ.	+5° ANG.	.022"	-	-
10.19.113	Capellozza	-	-	-	44	2,9mm	-17° TORQ.	+2° ANG.	.022"	-	-
10.19.114	Capellozza	-	-	34	-	2,9mm	-17° TORQ.	+2° ANG.	.022"	-	-
10.19.115	Capellozza	-	-	-	45	2,9mm	-22° TORQ.	+2° ANG.	.022"	-	-
10.19.116	Capellozza	-	-	35	-	2,9mm	-22° TORQ.	+2° ANG.	.022"	-	-
10.19.117	Capellozza	13	-	-	-	2,9mm	-5° TORQ.	+5° ANG.	.022"	-	-
10.19.118	Capellozza	-	23	-	-	2,9mm	-5° TORQ.	+5° ANG.	.022"	-	-
10.19.119	Capellozza	-	-	-	42 41	2,3mm	+4° TORQ.	+2° ANG.	.022"	-	-
10.19.120	Capellozza	-	-	31 32	-	2,3mm	+4° TORQ.	+2° ANG.	.022"	-	-
10.19.121	Capellozza	11	-	-	-	3,2mm	+14° TORQ.	+5° ANG.	.022"	-	-
10.19.122	Capellozza	-	21	-	-	3,2mm	+14° TORQ.	+5° ANG.	.022"	-	-
10.19.123	Capellozza	12	-	-	-	2,5mm	+10° TORQ.	+9° ANG.	.022"	-	-
10.19.124	Capellozza	-	22	-	-	2,5mm	+10° TORQ.	+9° ANG.	.022"	-	-
10.19.125	Capellozza	13	-	-	-	2,9mm	-2° TORQ.	+11° ANG.	.022"	-	-
10.19.126	Capellozza	-	23	-	-	2,9mm	-2° TORQ.	+11° ANG.	.022"	-	-

Código	Prescrição	SD	SE	IE	ID	Comp	Torque	Ângulo	Slot	CE	Org'
10.19.127	Capellozza	-	-	31 32	42 41	2,3mm	-6° TORQ.	0° ANG.	.022"	-	-
10.19.128	Capellozza	-	-	-	43	2,9mm	-11° TORQ.	0° ANG.	.022"	-	-
10.19.129	Capellozza	-	-	33	-	2,9mm	-11° TORQ.	0° ANG.	.022"	-	-
10.19.904	Capellozza	-	-	-	-	-	TORQ.	-	.022"	-	-
10.19.905	Capellozza	-	-	-	-	-	TORQ.	-	.022"	-	-
10.19.906	Capellozza	-	-	-	-	-	TORQ.	-	.022"	-	-
10.19.934	Capellozza	-	-	-	-	-	TORQ.	-	.022"	-	-
10.19.935	Capellozza	-	-	-	-	-	TORQ.	-	.022"	-	-
10.19.936	Capellozza	-	-	-	-	-	TORQ.	-	.022"	-	-
10.25.101	Ricketts	11	-	-	-	3,2mm	+22° TORQ.	+3° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.102	Ricketts	-	21	-	-	3,2mm	+22° TORQ.	+3° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.103	Ricketts	12	-	-	-	2,5mm	+14° TORQ.	+10° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.104	Ricketts	-	22	-	-	2,5mm	+14° TORQ.	+10° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.105	Ricketts	13	-	-	-	2,7mm	+7° TORQ.	+8° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.106	Ricketts	-	23	-	-	2,7mm	+7° TORQ.	+8° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.107	Ricketts	14	-	-	-	2,5mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.108	Ricketts	-	24	-	-	2,5mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.109	Ricketts	15	-	35	-	2,5mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.110	Ricketts	-	25	-	45	2,5mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.111	Ricketts	-	-	31 32	42 41	2,2mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.113	Ricketts	-	-	-	43	2,7mm	+7° TORQ.	+2° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.114	Ricketts	-	-	33	-	2,7mm	+7° TORQ.	+2° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.115	Ricketts	-	-	-	45 44	2,5mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.116	Ricketts	-	-	34 35	-	2,5mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.119	Ricketts	13	-	-	-	2,7mm	+7° TORQ.	+8° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.120	Ricketts	-	23	-	-	2,7mm	+7° TORQ.	+8° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.121	Ricketts	-	-	-	43	2,7mm	+7° TORQ.	+2° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.122	Ricketts	-	-	33	-	2,7mm	+7° TORQ.	+2° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.123	Ricketts	12	-	-	-	2,5mm	+10° TORQ.	+10° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.124	Ricketts	-	22	-	-	2,5mm	+10° TORQ.	+10° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.125	Ricketts	15	-	-	-	2,5mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.126	Ricketts	-	25	-	-	2,5mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.301	Ricketts	11	-	-	-	3,0mm	+22° TORQ.	+3° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.302	Ricketts	-	21	-	-	3,0mm	+22° TORQ.	+3° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.303	Ricketts	12	-	-	-	2,2mm	+14° TORQ.	+10° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.304	Ricketts	-	22	-	-	2,2mm	+14° TORQ.	+10° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.305	Ricketts	13	-	-	-	2,5mm	+7° TORQ.	+5° ANG.	.018"	C E	2797

Código	Prescrição	SD	SE	IE	ID	Comp	Torque	Ângulo	Slot	CE	Org'
10.25.306	Ricketts	-	23	-	-	2,5mm	+7° TORQ.	+5° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.307	Ricketts	-	-	-	43	2,5mm	+7° TORQ.	+5° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.308	Ricketts	-	-	33	-	2,5mm	+7° TORQ.	+5° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.900	Ricketts	-	-	-	-	-	-	-	.018"	C E	2797
10.25.901	Ricketts	-	-	-	-	-	-	-	.018"	C E	2797
10.25.905	Ricketts	-	-	-	-	-	-	-	.018"	C E	2797
10.30.101	Edgewise	11	21	-	-	3,4mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.30.102	Edgewise, Ricketts	12 11	21 22	-	-	3,0mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.30.103	Edgewise	-	-	31 32	42 41	1,8mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.30.104	Edgewise, Ricketts	12	22	31 32	42 41	2,3mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.30.105	Edgewise, Ricketts	15 14 13	23 24 25	33 34 35	45 44 43	2,3mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.30.106	Edgewise, Ricketts	15 14 13	23 24 25	33 34 35	45 44 43	3,0mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.30.107	Edgewise, Ricketts	12	22	31 32	42 41	2,3mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.30.108	Edgewise	16	26	36	46	3,4mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.30.111	Edgewise, Ricketts	15 14 13	-	33 34 35	-	3,0mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.30.112	Edgewise, Ricketts	-	23 24 25	-	45 44 43	3,0mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.30.201	Edgewise	11	21	-	-	3,4mm	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.30.202	Edgewise, Ricketts	11 12	22 21	-	-	3,0mm	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.30.203	Edgewise	-	-	31 32	42 41	1,8mm	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.30.205	Edgewise, Ricketts	12	22	31 32	42 41	2,3mm	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.30.206	Edgewise	15 14 13	23 24 25	33 34 35	45 44 43	2,5mm	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.30.207	Edgewise, Ricketts	15 14 13	23 24 25	33 34 35	45 44 43	2,3mm	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.30.208	Edgewise, Ricketts	15 14 13	23 24 25	33 34 35	45 44 43	3,0mm	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.30.209	Edgewise, Ricketts	12	22	31 32	42 41	2,3mm	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.30.210	Edgewise	16	26	36	46	3,4mm	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.30.211	Edgewise, Ricketts	13 14 15	-	33 34 35	-	3,0mm	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.30.212	Edgewise, Ricketts	-	23 24 25	-	45 44 43	3,0mm	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.30.900	Edgewise	-	-	-	-	-	-	-	.018"	C E	2797
10.30.901	Edgewise	-	-	-	-	-	-	-	.022"	C E	2797
10.31.201	Edgewise	11	21	-	-	3,4mm	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.31.206	Edgewise	15 14 13	23 24 25	33 34 35	45 44 43	2,6mm	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.31.207	Edgewise	15 14 13	23 24 25	33 34 35	45 44 43	2,3mm	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.001	M.B.T.	11	-	-	-	3,9mm	+17° TORQ.	+4° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.002	M.B.T.	-	21	-	-	3,9mm	+17° TORQ.	+4° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.003	M.B.T.	12	-	-	-	2,9mm	+10° TORQ.	+8° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.004	M.B.T.	-	22	-	-	2,9mm	+10° TORQ.	+8° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.005	M.B.T.	13	-	-	-	2,9mm	-7° TORQ.	+8° ANG.	.022"	C E	2797

Código	Prescrição	SD	SE	IE	ID	Comp	Torque	Ângulo	Slot	CE	Org'
10.35.006	M.B.T.	-	23	-	-	2,9mm	-7° TORQ.	+8° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.007	M.B.T.	15 14	24 25	-	-	2,9mm	-7° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.011	M.B.T.	-	-	-	43	2,9mm	-6° TORQ.	+3° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.012	M.B.T.	-	-	33	-	2,9mm	-6° TORQ.	+3° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.013	M.B.T.	-	-	-	44	2,9mm	-12° TORQ.	+2° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.014	M.B.T.	-	-	34	-	2,9mm	-12° TORQ.	+2° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.015	M.B.T.	-	-	-	45	2,9mm	-17° TORQ.	+2° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.016	M.B.T.	-	-	35	-	2,9mm	-17° TORQ.	+2° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.017	M.B.T.	13	-	-	-	3,2mm	0° TORQ.	+8° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.018	M.B.T.	-	23	-	-	3,2mm	0° TORQ.	+8° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.019	M.B.T.	-	-	-	43	3,2mm	0° TORQ.	+3° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.020	M.B.T.	-	-	33	-	3,2mm	0° TORQ.	+3° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.025	M.B.T.	13	-	-	-	2,7mm	0° TORQ.	+8° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.026	M.B.T.	-	23	-	-	2,7mm	0° TORQ.	+8° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.028	M.B.T.	-	-	-	43	2,7mm	0° TORQ.	+3° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.029	M.B.T.	-	-	33	-	2,7mm	0° TORQ.	+3° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.030	M.B.T.	13	-	-	-	2,7mm	-7° TORQ.	+8° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.031	M.B.T.	-	23	-	-	2,7mm	-7° TORQ.	+8° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.032	M.B.T.	-	-	-	43	2,7mm	-6° TORQ.	+3° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.033	M.B.T.	-	-	33	-	2,7mm	-6° TORQ.	+3° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.034	M.B.T.	15 14	-	-	-	2,9mm	-7° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.035	M.B.T.	-	24 25	-	-	2,9mm	-7° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.036	M.B.T.	-	-	-	44	2,9mm	-12° TORQ.	+2° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.037	M.B.T.	-	-	34	-	2,9mm	-12° TORQ.	+2° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.038	M.B.T.	-	-	-	45	2,9mm	-17° TORQ.	+2° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.039	M.B.T.	-	-	35	-	2,9mm	-17° TORQ.	+2° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.101	M.B.T.	11	-	-	-	3,2mm	+17° TORQ.	+4° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.102	M.B.T.	-	21	-	-	3,2mm	+17° TORQ.	+4° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.103	M.B.T.	12	-	-	-	2,5mm	+10° TORQ.	+8° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.104	M.B.T.	-	22	-	-	2,5mm	+10° TORQ.	+8° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.105	M.B.T.	13	-	-	-	2,9mm	-7° TORQ.	+8° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.106	M.B.T.	-	23	-	-	2,9mm	-7° TORQ.	+8° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.107	M.B.T.	13	-	-	-	2,9mm	0° TORQ.	+8° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.108	M.B.T.	-	23	-	-	2,9mm	0° TORQ.	+8° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.109	M.B.T.	15 14	-	-	-	2,9mm	-7° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.110	M.B.T.	-	24 25	-	-	2,9mm	-7° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.111	M.B.T.	-	-	31 32	42 41	2,3mm	-6° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797

Código	Prescrição	SD	SE	IE	ID	Comp	Torque	Ângulo	Slot	CE	Org¹
10.35.112	M.B.T.	-	-	-	43	2,9mm	-6° TORQ.	+3° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.113	M.B.T.	-	-	33	-	2,9mm	-6° TORQ.	+3° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.114	M.B.T.	-	-	-	43	2,9mm	0° TORQ.	+3° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.115	M.B.T.	-	-	33	-	2,9mm	0° TORQ.	+3° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.116	M.B.T.	-	-	-	44	2,9mm	-12° TORQ.	+2° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.117	M.B.T.	-	-	34	-	2,9mm	-12° TORQ.	+2° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.118	M.B.T.	-	-	-	45	2,9mm	-17° TORQ.	+2° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.119	M.B.T.	-	-	35	-	2,9mm	-17° TORQ.	+2° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.401	M.B.T.	11	-	-	-	3,2mm	+17° TORQ.	+4° ANG.	.018"	C E	2797
10.35.402	M.B.T.	-	21	-	-	3,2mm	+17° TORQ.	+4° ANG.	.018"	C E	2797
10.35.403	M.B.T.	12	-	-	-	2,5mm	+10° TORQ.	+8° ANG.	.018"	C E	2797
10.35.404	M.B.T.	-	22	-	-	2,5mm	+10° TORQ.	+8° ANG.	.018"	C E	2797
10.35.412	M.B.T.	15 14	24 25	-	-	2,9mm	-7° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.413	M.B.T.	-	-	-	44	2,9mm	-12° TORQ.	+2° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.414	M.B.T.	-	-	34	-	2,9mm	-12° TORQ.	+2° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.415	M.B.T.	-	-	-	45	2,9mm	-17° TORQ.	+2° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.416	M.B.T.	-	-	35	-	2,9mm	-17° TORQ.	+2° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.417	M.B.T.	13	-	-	-	2,9mm	0° TORQ.	+8° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.418	M.B.T.	-	23	-	-	2,9mm	0° TORQ.	+8° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.419	M.B.T.	-	-	31 32	42 41	2,3mm	-6° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.420	M.B.T.	-	-	-	43	2,9mm	0° TORQ.	+3° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.421	M.B.T.	-	-	33	-	2,9mm	0° TORQ.	+3° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.901	M.B.T.	-	-	-	-	-	-	-	.022"	C E	2797
10.35.902	M.B.T.	-	-	-	-	-	-	-	.022"	C E	2797
10.35.903	M.B.T.	-	-	-	-	-	-	-	.022"	C E	2797
10.35.904	M.B.T.	-	-	-	-	-	-	-	.022"	C E	2797
10.35.905	M.B.T.	-	-	-	-	-	-	-	.022"	C E	2797
10.35.906	M.B.T.	-	-	-	-	-	-	-	.022"	C E	2797
10.35.924	M.B.T.	-	-	-	-	-	-	-	.018" / .022"	C E	2797
10.35.935	M.B.T.	-	-	-	-	-	-	-	.022"	C E	2797
10.35.936	M.B.T.	-	-	-	-	-	-	-	.022"	C E	2797
10.40.201	Rossi	15 14 13 12 11	21 22 23 24 25	31 32 33 34 35	45 44 43 42 41	1,8mm	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	-	-
10.65.101	Edgewise	11	21	-	-	3,0mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.65.103	Edgewise	12	22	31 32	42 41	2,2mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.65.104	Edgewise	15 14 13	-	33 34 35	-	2,5mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.65.105	Edgewise	-	23 24 25	-	43 44 45	2,5mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.65.106	Edgewise	15 14 13	23 24 25	33 34 35	45 44 43	2,5mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797

Código	Prescrição	SD	SE	IE	ID	Comp	Torque	Ângulo	Slot	CE	Org¹
10.65.201	Edgewise	11	21	-	-	3,0mm	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.65.203	Edgewise	12	22	31 32	42 41	2,2mm	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.65.204	Edgewise	13	-	33	-	2,5mm	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.65.205	Edgewise	-	23	-	43	2,5mm	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.65.206	Edgewise	15 14 13	23 24 25	33 34 35	45 44 43	2,5mm	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.65.301	Edgewise	11	21	-	-	3,0mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.65.302	Edgewise	12	22	31 32	42 41	2,2mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.65.303	Edgewise	15 14 13	23 24 25	33 34 35	45 44 43	2,5mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.65.304	Edgewise	13	-	33	-	2,5mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.65.305	Edgewise	-	23	-	43	2,5mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.65.401	Edgewise	11	21	-	-	3,0mm	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.65.402	Edgewise	12	22	31 32	42 41	2,2mm	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.65.403	Edgewise	15 14 13	23 24 25	33 34 35	45 44 43	2,5mm	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.65.404	Edgewise	13	-	33	-	2,5mm	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.65.405	Edgewise	-	23	-	43	2,5mm	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.65.900	Edgewise	-	-	-	-	-	-	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.65.901	Edgewise	-	-	-	-	-	-	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.65.902	Edgewise	-	-	-	-	-	-	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.65.903	Edgewise	-	-	-	-	-	-	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.65.904	Edgewise	-	-	-	-	-	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.65.905	Edgewise	-	-	-	-	-	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.65.906	Edgewise	-	-	-	-	-	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.65.907	Edgewise	-	-	-	-	-	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.65.934	Edgewise	-	-	-	-	-	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.65.935	Edgewise	-	-	-	-	-	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.65.936	Edgewise	-	-	-	-	-	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.65.937	Edgewise	-	-	-	-	-	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797

Revisão	Alterações
0	Elaboração e disponibilização no portal Morelli.
1	Revisão das contraindicações, efeitos colaterais, advertências e inclusão do Orthobond Plus.
2	Revisão da indicação de colagem.
3	Inclusão das peças M.B.T Light HP e revisão das instruções para obtenção da instrução digital e da tabela de simbologia.
4	Revisão dos alertas em relação a utilização dos produtos em ambiente de ressonância magnética por imagem, inclusão da contraindicação e revisão da advertência.
5	Revisão das informações sobre os componentes.
6	Revisão da máscara, remoção da composição, informe referência da versão técnica da prescrição Capellozza.
7	Inclusão de novos códigos de produtos, atualização de máscara, advertências e ajuste de idiomas.
8	Ajustes das Advertências.
9	Inclusão da advertência: Não toque nos bráquetes com pontas ultrassônicas: pode ocasionar fraturas e descolamentos.
10	Revisão da colagem e advertências.
11	Atualização da Tabela de Códigos.
12	Inclusão da composição e finalidade prevista.