

CATÁLOGO DE PRODUTOS



ORAIS

[manequins odontológicos]



Escaneie os QR codes
ao longo do catálogo e seja
direcionado para vídeos
dos produtos.



O objetivo da Orais Manequins Odontológicos é atender às necessidades específicas de cada curso.

Para isso, trabalhamos em conjunto com os professores no desenvolvimento de soluções que interajam com o conteúdo programático; assim, garantindo um aprendizado consistente e, ao mesmo tempo, proporcionando ao aluno um produto com excelente custo-benefício.



Manequins Odontológicos

Manequim Dentística -----	04
Manequim Dentística (dente estético) ---	04
Manequim Dentística com preparos -----	05
Manequim Materiais Dentários -----	06
Manequim Materiais Dentários 201 -----	07
Manequim Materiais Dentários 210 -----	08
Manequim Materiais Dentários 217 -----	09
Manequim Perio FG -----	10
Manequim Periodontia Padrão -----	11
Manequim Prótese Total -----	11
Manequim Odontopediatria -----	12
Manequim Odontopediatria modelo PLP -	12
Manequim Endodontia -----	13
Endobase -----	13
Dentes de Endodontia -----	13
Manequim Odontopediatria modelo PLP -	12
Manequim Articulado para técnicas cirurgicas menores -----	14 e 15
Manequim para técnicas cirurgicas menores -----	14 e 15
Manequim Especialização Periodontia - S.G. -----	16
Manequim Periodontiam / Implante - Especialização ---	17
Manequim de Especialização em Periodontia FB01 -----	17
Manequim Expecialização Periodontia - S.L. -----	18

Simulador de Paciente

Simulador de Paciente -----	19
Máscara para o Simulador de Paciente-	19

Materiais para otimização de aulas laboratoriais

Modelos para treinamento de sutura M.CIR.401 -----	20
Modelos para treinamento de sutura M.CIR.402 -----	20
Placa para treinamento de sutura e incisão -----	20
Macro simulador de cárie -----	21
Macro Modelo de Preparos Cavitários anteriores/posteriores -----	21
Sequência de Dentística - Plástica -----	21
Suporte Ergonomic Flex -----	22
Cera para Escultura -----	22
Macro Modelo Plástico -----	23
Macro modelo de dentes naturais com preparos cavitários -----	23

Kits Multidisciplinares ----- 24

Jogos de Dentes -----25

Manequins Odontológicos

Manequim Dentística

Cod.100



- Manequim desenvolvido para treinamento de diversos casos clínicos;
- Dentes opacos com sistema de encaixe que permite troca;
- Base rígida, sistema de articulação e gengiva flexível.

Manequim Dentística Estético

Cod.101



- Manequim desenvolvido para treinamento de diversos casos clínicos;
- Dentes estéticos com sistema de encaixe que permite troca;
- Base rígida, sistema de articulação e gengiva flexível.

Manequins Odontológicos

Manequim Dentística com preparos @aosdeia

Cod.102



- Dentes com sistema de encaixe que permite troca;
- Base rígida, sistema de articulação e gengiva flexível;



15 classe III MOD extensa com ausência do terço oclusal das cúspides vestibular e lingual;
16 classe III MOD extensa;



44 OL extensa;



11 preparado para faceta com classe IV extensa;



46 OV extensa.



13 preparado para faceta com ausência do terço incisal;



Manequins Odontológicos

Manequim Materiais Dentários

Cod.200



- Dentes com sistema de encaixe que permite troca;
- Base rígida, sistema de articulação e gengiva flexível.



Acompanha coroas para treinamento de cimentação;

Preparo para coroa total nos dentes 21 e 11;

Classe 1 oclusal nos pré-molares e molares em diferentes profundidades.



Manequins Odontológicos

Manequim Materiais Dentários 201

Cod.201



- Dentes com sistema de encaixe que permite troca;
- Base rígida, sistema de articulação e gengiva flexível;



- 11 Cavity Classe V V e Classe III Distal
- 14 Cavity Classe II MO
- 15, 16 Cavity Classe I O
- 21 Cavity Classe V V e Cavity Classe IV Distal
- 23 Dente preparado para confecção de retentor intraradicular
- 24 Cavity Classe II MOD
- 26 Cavity Classe I O (2 pontos)



- 31 Cavity Classe IV Distal
- 32 Cavity Classe III Distal
- 33 Cavity Classe V V
- 36 Cavity Classe I O
- 41 Cavity Classe III Mesial
- 42 Cavity Classe IV Distal
- 45 Cavity Classe II OD
- 46 Cavity Classe II MOD

Manequins Odontológicos

Manequim Materiais Dentários 210

Cod.210



- Dentes com sistema de encaixe que permite troca;
- Base rígida, sistema de articulação e gengiva flexível;
- Acompanha coroa total do 11;



- 11, 13 preparo para coroa total;
- 14, 17 cavidade classe II MO;
- 15, 24, 26 cavidade classe I O;
- 25 cavidade classe II OD;
- 27 cavidade classe II OL;



- 34, 36, 38, 46 cavidade classe I O;
- 35, 37 cavidade classe II MO;
- 44, 45 cavidade classe V V;
- 47 cavidade classe I O (profunda).

Manequins Odontológicos

Manequim Materiais Dentários 217

Cod.217



- Dentes com sistema de encaixe que permite troca;
- Base rígida, sistema de articulação e gengiva flexível;
- Acompanha coroa total do 11 e 26;



- 11, 26 preparo para coroa total;
- 14, 35 cavidade classe II OD;
- 15, 17, 48 cárie oclusal sugestivo classe I;
- 16, 25, 27, 36, 37, 38, 46 cavidade classe I O;
- 21 cárie vestibular sugestivo classe V e cárie distal sugestivo classe IV;
- 22 cárie m e d sugestivo classe III;
- 23 dente preparado para confecção de retentor intrarradicular;
- 24, 34 cavidade classe II MOD;
- 28 cárie oclusal sugestivo classe I em 3 pontos;
- 31 cavidade classe III D;
- 32, 41 cavidade classe IV M;
- 42 cavidade classe III M;
- 43 cárie vestibular sugestivo classe V;
- 44, 45 cavidade classe V V;
- 47 cavidade classe I O (profunda).



Manequins Odontológicos



Manequim Periodontia FG

Cod.309



- Manequim desenvolvido para treinamento de diversos casos clínicos;
- Mandíbula com gengiva transparente, sem técnicas cirúrgicas;
- Gengiva suturável aderida ao osso, permitindo sindesmotomia (maxila);
- Remoção de cálculo dental;
- Não troca dentes.



Aumento de Coroa Clínica, nos dentes 15 e 16 (parede vestibular fraturada 1 mm aquém da borda gengival);



Gingivectomia de 13 à 23;



Retração de gengiva nos dentes 24 e 25;



Cunha distal na região do 18 e 28.

Manequins Odontológicos

Manequim Periodontia Padrão

Cod.300



- Desenvolvido com tinta que permite raspagem uniforme;
- Dentes com sistema de encaixe que permite troca;
- Base rígida, sistema de articulação e gengiva flexível;



Defeito ósseo.

Manequim Prótese Total

Cod.700



- Com base desdentado de resina rígida;
- Não aderente ao material de moldagem;
- Base rígida e sistema de articulação.

Manequins Odontológicos

Manequim Odontopediatria

Cod.600



- Modelo compatível com criança de seis anos;
- Dentição mista;
- Dentição decídua completa;
- Primeiros molares permanentes irrompidos;
- Base rígida, dentes e sistema de articulação;
- Contém 24 dentes.

Manequim Odontopediatria PLP

Cod.601



- Modelo compatível com criança de seis anos;
- Dentes 55, 74, 85, 51 polpados;
- Dentição mista;
- Dentição decídua completa;
- Primeiros molares permanentes irrompidos;
- Sistema de articulação, gengiva de silicone;
- Contém 24 dentes.

Dentes polpados e gengiva flexível

Manequins Odontológicos



Manequim Endodontia

Cod.500



- Possibilita adaptação de dentes naturais e artificiais para instrumentação de canais unirradiculares e birradiculares;
- Gengiva flexível de borracha de silicone;
- Espaço para encaixe do filme radiográfico;
- Sistema de articulação;
- Não acompanha os dentes.



Endobase

Cod.6000

- Dispositivo para fixar dente natural ou artificial permitindo instrumentação, irrigação e obturação, para realização de técnicas endodônticas;
- Dispositivo radiolucido;
- Possui orifício na parte anterior para alça labial do localizador apical.



Dente de Endodontia (Padrão ou transparente)

Cod.10400 ou 10500



- Dentes similares aos naturais feitos em resina radiopaca;
- Radiografias ao lado tiradas em raio X digital com 0.6 segundos de exposição;
- Dentes transparentes não são radiopacos.



Manequins Odontológicos

Manequim Articulado para Técnicas Cirúrgicas Menores

Cod.405



- Dentes 14, 15, 16, 21, 23 e 25 hígidos para extração;
- Dente 37, 43 e 47 hígido para extração;

Manequim para Técnicas Cirúrgicas Menores

Cod.400



- Dentes 14, 15, 16, 21, 23 e 25 hígidos para extração;
- Dente 37, 43 e 47 hígido para extração;

Especificações dos Manequins para Técnicas Cirúrgicas Menores:

Na base superior:




Dente 28 incluso, vertical e vestibularizado;



Dente 12 resto radicular;



Semiologia na região dos dentes 14, 15 e 16, lesão em cordão semelhante a lesões por prótese mal adaptada.

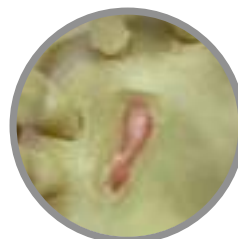

Dente 13 incluso, horizontal, palatinizado com a tábua óssea rompida;

Na base inferior:



Dentes 38 e 48 incluso, impactado e mesioangulado;



Dente 33 resto radicular;



Proliferação óssea mandibular na região lingual dos dentes 33 e 43.



Manequins Odontológicos

Manequim Especialização Periodontia - S.G.

Cod.304



* Modelo preso por ventosas *

- Área para implante na região do 16 e do 26;
- Enxerto epitelizado;
- Enxerto Conjuntivo;
- Correção de Rebordo (enxerto misto e enxerto mucoso);
- Enxerto em Rolo;



Gingivectomia de 13 à 23;



Gengiva em 2 cores simulando tecido epitelial e conjuntivo;



Cunha Distal;



Remoção de tecido conjuntivo.



Retração gengival no 14, 15 e 24, 25;



Manequins Odontológicos

Manequim de Periodontia / Implante - Especialização

Cod.303



- Dentes 11 e 21 com raízes e alvéolos anatômicos;
- Área para implante na região do 16 e do 26;
- Enxerto epitelizado e enxerto conjuntivo;
- Correção de Rebordo (enxerto misto e enxerto mucoso);
- Enxerto em Rolo;



* Modelo preso por ventosas *



Gingivectomia de 13 à 23;



Retração gengival no 14 e no 15;



Remoção de tecido conjuntivo no palato.

Manequim de Especialização em Periodontia FB01

Cod.306



- Área para implante na região do 16 e do 26;
- Cárie subgengival na distal do 24 e na mesial do 25;
- Remoção de tecido conjuntivo no palato;



Retração gengival nos dentes 14 e 15;



Gingivectomia de 13 à 23;



Dentes 14 com raiz e alvéolos anatômico.

Manequins Odontológicos


Manequim Especialização Periodontia - S.L.

Cod.305



* Modelo preso por ventosas *

- Manequim desenvolvido para treinamento de diversos casos clínicos;

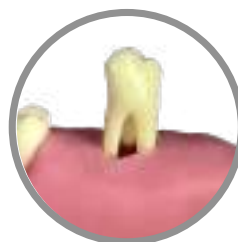


17 preparados para extração, com raiz e alvéolo anatômicos para implante imediato;



11, 13 e 15 retração gengival na vestibular;




21 preparados para extração, com raiz e alvéolo anatômicos para implante imediato;

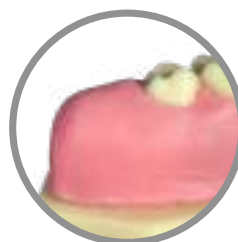

17 e 27 com gengiva edemaciada permitindo cirurgia de cunha distal;



16 ausente;

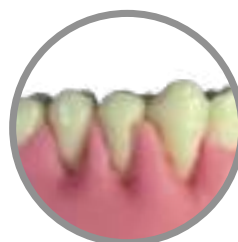

23, 24 e 25 retração gengival na vestibular;




Gengiva em 2 cores simulando tecido epitelial e conjuntivo.



Simulador de Paciente

Simulador de Paciente Orais Manequins

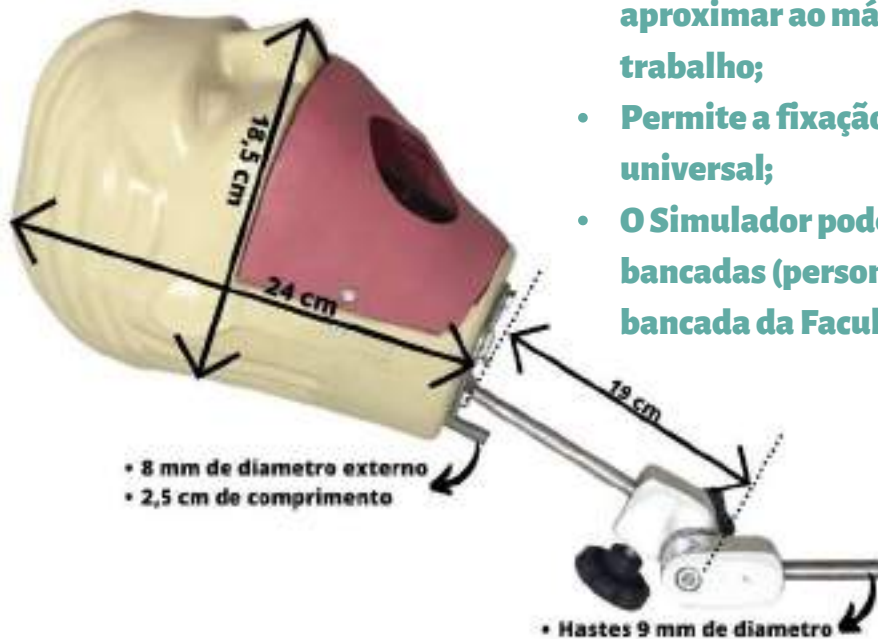

- Simulador de Paciente da Orais Manequins é o mais resistente e com o menor custo do mercado;
- Permite várias regulagens com o intuito de se aproximar ao máximo da posição ergonômica de trabalho;
- Permite a fixação do manequim por um pino universal;
- O Simulador pode ser fixado em vários tipos de bancadas (personalizamos o encaixe conforme a bancada da Faculdade).

Máscara para o Simulador de Paciente Orais Manequins



- Máscara exclusiva para o Simulador de Paciente Orais Manequins.

Material para otimização de aulas laboratoriais



Modelo para treinamento de sutura M.CIR.401

Cod.401



- Treinamento de sutura pós extração de enxerto conjuntivo;
- Treinamento de sutura em corte gengival;
- Modelo em borracha suturável.



Modelo para treinamento de sutura M.CIR.402

Cod.402

- Treinamento de sutura em corte gengival;
- Possibilita o treinamento de várias técnicas;
- Modelo em borracha suturável.



Placa para treinamento de sutura e incisão

Cod.9000



- Placa com interior de espuma, coberto por material que simula a gengiva;
- Possibilita treinamento de várias técnicas como: incisão, divulsão e técnicas de sutura;
- Dimensões: comprimento da superfície útil: 19 cm, largura útil: 14 cm.



Macro Simulador de Cárie

Cod.11000



- Macro modelo mostrando cárie tipo túnel na mesial do dente 34 e distal do dente 37;
- Dentes 34 e 35 simulando cárie recidivante;
- Cera friável marrom;
- Simula tecido cariado nos dentes 36, 37 e 38;
- Em um deles fundo de cavidade em material rígido marrom simulando dentina secundária.

Modelo de Preparos Cavitários anteriores/posteriores

Cod.1000

- Superior: Dentes de 13 à 23;
Diastema entre 21 e 11;
Possibilita treinamento de fechamento de diastema.
- Inferior: Dentes de 34 à 37;
Possibilita treinamento de dentística restauradora;
34, 35 e 37 Classe I O;
36 Classe II OD.



Sequência de Dentística - Plástica

Cod.900



- Usada para que o aluno tenha referência na execução dos preparos em seu manequim.

Material para otimização de aulas laboratoriais

Cera para Escultura



- Cores: Azul ou marfim
- Tamanhos: MICRO 13 X 13 X 34 e REGULAR 15 X 15 X 55

Suporte Ergonomic Flex

Cod.3000



- Suporte portátil para fixação do manequim por meio do do articulador (pino universal);
- O manequim não acompanha o suporte.

Macro Modelo Plástico

Cod.800

- Macro dente usado na matéria de anatomia dental e escultura;
- Usado em dentística operatória para confecção de macro cavidades;
- Possibilita confecção de preparos de prótese fixa;
- Contém 14 dentes (21 a 27 e 31 a 37).



Suporte vendido à parte

Macro Modelo Plástico com Preparos Cavitários

Cod.801

- 21 Classe IV mesial;
- 22, 23 Classe III mesial;
- 24 Classe II MO;
- 25 Classe II OD e slot horizontal mesial;
- 26 Classe II MODVP;
- 27 Classe II MOD;
- 31 classe III;
- 32 Classe I de sockwell;
- 33 Classe IV de howard & simon;
- 34 Slot vertical mesial;
- 35 Classe V V e Classe IV de howard & simon;
- 36 Classe I oclusal;
- 37 Classe II ODV.



Suporte vendido à parte

Kits Multidisciplinares

Kit Multidisciplinar Materiais Dentários

Cod.2011 ou 2101 ou 2171



- Um manequim Materiais Dentários montado na configuração ou 201 ou 210 ou 217.
- Um jogo de dente de periodontia;
- Um jogo de dente de dentística (estético);
- Um par de gengivas transparentes.

Kit Manequim com Jogo de dentes de Dentística

Cod.2012 ou 2102 ou 2172



- Um manequim Materiais Dentários montado na configuração ou 201 ou 210 ou 217.
- Um Jogo de Dente de Dentística.

Kit Manequim Dentística / Periodontia

Cod.1031



- Um manequim montado na configuração Dentística Estético.
- Um jogo de dente de periodontia;
- Um par de gengivas transparentes.

Jogos de Dentes

Jogo de Dentes- Dentística (estético ou opaco)



- Desenvolvido para treinamento de diversos casos clínicos;
- Dentes com sistema de encaixe que permite troca;
- Contém 32 dentes.

Jogo de Dentes- Periodontia



- Desenvolvido com tinta que permite raspagem uniforme;
- Dentes com sistema de encaixe que permite troca;
- Contém 32 dentes.

Jogo de Dentes- Materiais Dentários



- Dentes com sistema de encaixe que permite troca;
- Acompanha coroas para treinamento de cimentação;
- Preparo para coroa total nos dentes 21 e 11;
- Classe 1 oclusal nos pré-molares e molares em diferentes profundidades.



ORAIS

[manequins odontológicos]

www.oraiss.com.br
contato@oraiss.com.br

Tel: 55 (62) 99862-3237
Rua P-10, 96 - Goiânia
GO - Brasil - CEP:74.543-230