

PONTEIRAS

ULTRASSÔNICAS



MICRODONT




Somos uma marca brasileira de consumíveis odontológicos e equipamentos leves há mais de 30 anos.

Nossos produtos são reconhecidos em mais de 95 países pela sua excelência e desempenho excepcionais. Além disso, temos as mais importantes certificações internacionais de qualidade, como MDSAP, FDA, CE e ISO 13485.

Estamos comprometidos em oferecer soluções de qualidade, alto desempenho e competitividade para nossos clientes em todo o mundo.



PROFILAXIA

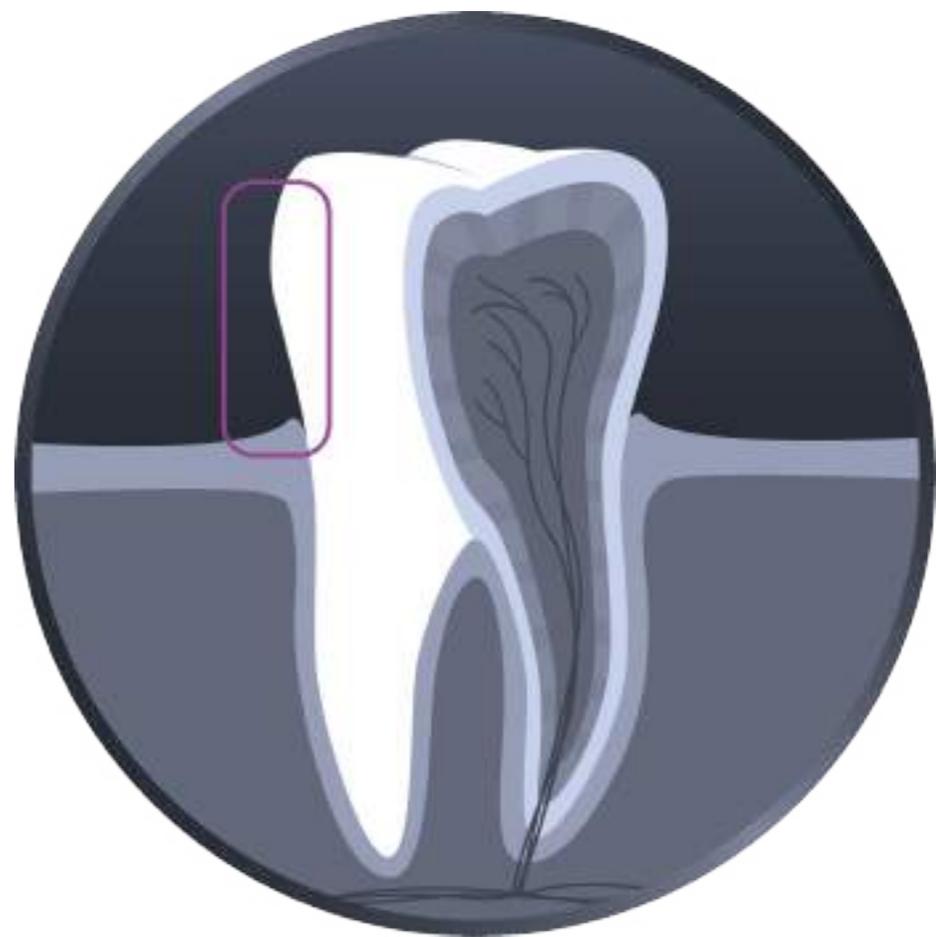



E COMPATIBILIDADE DO ENCAIXE: Advance 1; Advance 2; Advance View; Advance 5; Advance 6; Advance 7; Advanced S; Advanced SEL; Alt; Emissionic (MMO); EMS Pm100; EMS Pm200; Kavo; Kondortec; Mectron; Mini Piezon; Ortus; Scaler Jet; W&H; Woodpecker.

N COMPATIBILIDADE DO ENCAIXE: Adiel Plus; Advanced Se; DMC; DTE; Easy Sonic; GG Dent; Gnatius; Helse Ultrasonic; J Morita; NSK; Olsen; Ortus Import; Satelec; Shuster; Spartan; Ultradent; VDW; Vt150.

E COMPATIBILIDADE DO ENCAIXE: Advance 1; Advance 2; Advance View; Advance 5; Advance 6; Advance 7; Advanced S; Advanced SEL; Alt; Emissionic (MMO); EMS Pm100; EMS Pm200; Kavo; Kondortec; Mectron; Mini Piezon; Ortus; Scaler Jet; W&H; Woodpecker.

N COMPATIBILIDADE DO ENCAIXE: Adiel Plus; Advanced Se; DMC; DTE; Easy Sonic; GG Dent; Gnatius; Helse Ultrasonic; J Morita; NSK; Olsen; Ortus Import; Satelec; Shuster; Spartan; Ultradent; VDW; Vt150.

E G1 10.012.001 | **GD1** 10.012.011 | **N**



- Auxilia na remoção de cálculos clinicamente visíveis, presentes na coroa limitando-se até a margem gengival em pequena quantidade ou pouco aderidos.
- Pode ser usada nas faces proximais, e se cabível a situação clínica também pode ser usado nas faces vestibular e lingual/palatina.



E G2 10.012.002 | **GD2** 10.012.012 | **N**



- Auxilia na remoção de cálculos **volumosos** clinicamente visíveis, presentes na coroa limitando-se até a margem gengival.
- Idealmente aplicável em faces vestibulares e linguais/palatinas.



E G3 10.012.003 | **GD3** 10.012.013 | **N**



- Auxilia na remoção de cálculos supragengival interproximal.
- Auxilia na remoção de cálculo subgengival (bolsas rasas)



E G4 10.012.004 | **GD4** 10.012.014 | **N**



- Auxilia na remoção de cálculo supragengival interproximal.
- Auxilia na remoção de cálculo subgengival (bolsas rasas)



E G5 10.012.005 | **GD5** 10.012.015 | **N**



- Remoção de cálculos supragengivais clinicamente visíveis, pouco aderidos e/ou em pequena quantidade.
- Idealmente indicado nas faces proximais, e se cabível a situação clínica também pode ser usado nas faces vestibular e lingual/palatina.



E G6 10.012.006 | **GD6** 10.012.016 | **N**



- Remoção de cálculo volumoso na face vestibular e lingual/palatina.



PERIODONTIA





E COMPATIBILIDADE DO ENCAIXE: Advance 1; Advance 2; Advance View; Advance 5; Advance 6; Advance 7; Advanced S; Advanced SEL; Alt; Emissionic (MMO); EMS Pm100; EMS Pm200; Kavo; Kondortec; Mectron; Mini Piezon; Ortus; Scaler Jet; W&H; Woodpecker.

N COMPATIBILIDADE DO ENCAIXE: Adiel Plus; Advanced Se; DMC; DTE; Easy Sonic; GG Dent; Gnatus; Helse Ultrasonic; J Morita; NSK; Olsen; Ortus Import; Satelec; Shuster; Spartan; Ultradent; VDW; Vt150.

E COMPATIBILIDADE DO ENCAIXE: Advance 1; Advance 2; Advance View; Advance 5; Advance 6; Advance 7; Advanced S; Advanced SEL; Alt; Emissionic (MMO); EMS Pm100; EMS Pm200; Kavo; Kondortec; Mectron; Mini Piezon; Ortus; Scaler Jet; W&H; Woodpecker.

N COMPATIBILIDADE DO ENCAIXE: Adiel Plus; Advanced Se; DMC; DTE; Easy Sonic; GG Dent; Gnatus; Helse Ultrasonic; J Morita; NSK; Olsen; Ortus Import; Satelec; Shuster; Spartan; Ultradent; VDW; Vt150.

E P1 10.012.007 | **PD1** 10.012.017 **N**



- Remoção de cálculo subgingival, com formação apical à margem gengival, normalmente de difícil visualização clinicamente.



E P3 10.012.008 | **PD3** 10.012.018 **N**



- Remoção de cálculo subgingival, com formação apical à margem gengival, normalmente de difícil visualização clinicamente.



E P3D 10.012.045 | **PD3D** 10.012.063 **N**




- Regularização de raízes após cirurgias periodontais.
- Remoção de arestas de coroas restauradas.



E P4 10.012.009 | **PD4** 10.012.019 **N**



- Remoção de cálculo interproximal.
- Se cabível aplicação clínica pode ser aplicado em outras faces.

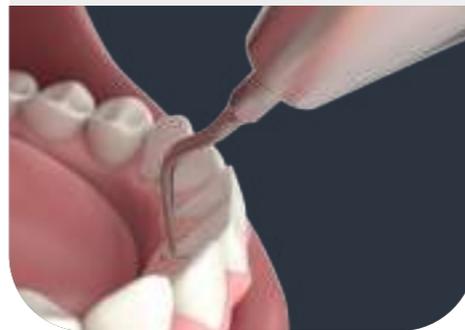


E P4D 10.012.046 | **PD4D** 10.012.064 **N**



- Auxiliar em procedimentos periodontais onde uma ponta com extremidade afilada, diamantada e com alta refrigeração é necessária, além disso, pode utilizar para atuar refinando a cirurgia de acesso e removendo o teto da câmara pulpar.



ENDODONTIA

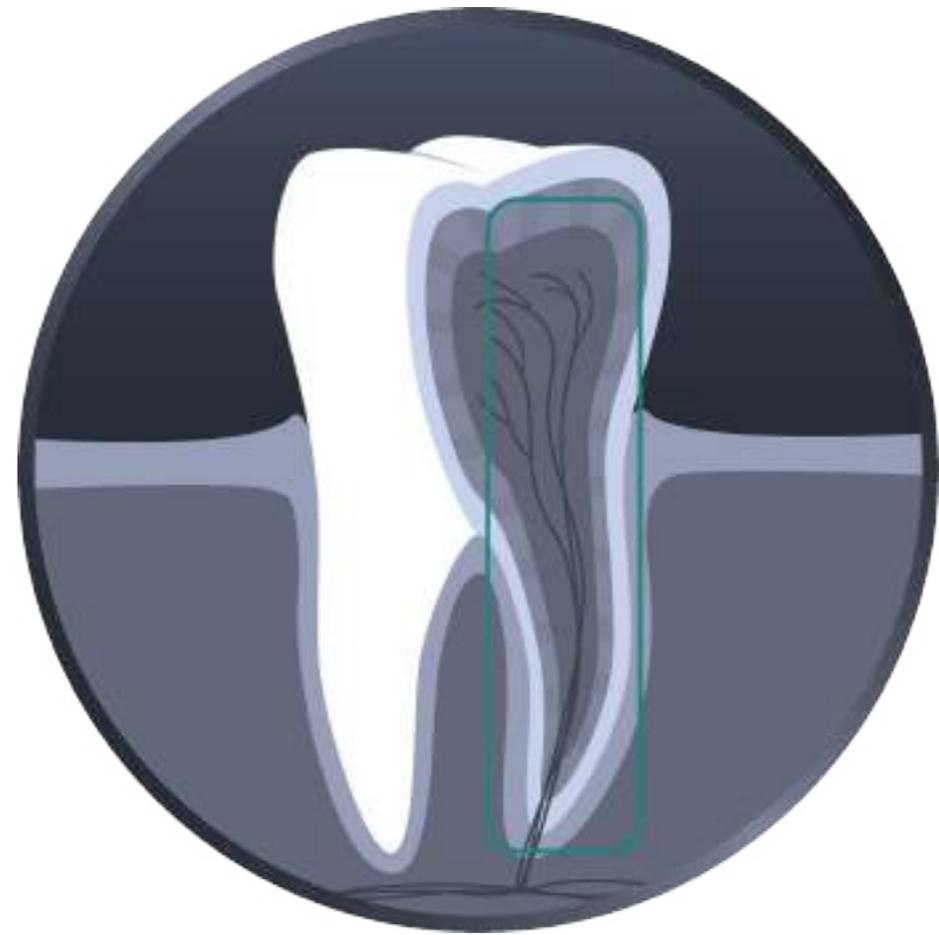



E COMPATIBILIDADE DO ENCAIXE: Advance 1; Advance 2; Advance View; Advance 5; Advance 6; Advance 7; Advanced S; Advanced SEL; Alt; Emissionic (MMO); EMS Pm100; EMS Pm200; Kavo; Kondortec; Mectron; Mini Piezon; Ortus; Scaler Jet; W&H; Woodpecker.

N COMPATIBILIDADE DO ENCAIXE: Adiel Plus; Advanced Se; DMC; DTE; Easy Sonic; GG Dent; Gnatus; Helse Ultrasonic; J Morita; NSK; Olsen; Ortus Import; Satelec; Shuster; Spartan; Ultradent; VDW; Vt150.

E COMPATIBILIDADE DO ENCAIXE: Advance 1; Advance 2; Advance View; Advance 5; Advance 6; Advance 7; Advanced S; Advanced SEL; Alt; Emissionic (MMO); EMS Pm100; EMS Pm200; Kavo; Kondortec; Mectron; Mini Piezon; Ortus; Scaler Jet; W&H; Woodpecker.

N COMPATIBILIDADE DO ENCAIXE: Adiel Plus; Advanced Se; DMC; DTE; Easy Sonic; GG Dent; Gnatus; Helse Ultrasonic; J Morita; NSK; Olsen; Ortus Import; Satelec; Shuster; Spartan; Ultradent; VDW; Vt150.

E E1 10.012.010 | **ED1** 10.012.020 **N**




- Indicado no suporte para limas usadas durante a limpeza e alargamento de canais.
- Comumente utilizado em dentes **anteriores**.
- Com ângulo de **120°**.



E E2 10.012.048 | **ED2** 10.012.037 **N**



- Indicado no suporte para limas usadas durante a limpeza e alargamento de canais.
- Comumente utilizado em dentes **posteriores**.
- Com ângulo de **90°**.

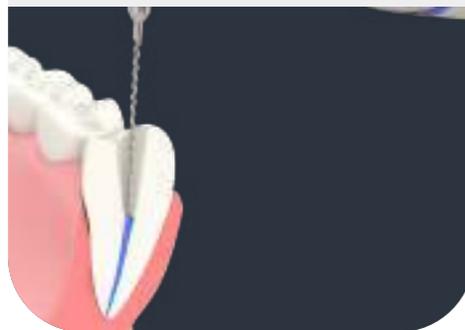


E E3 10.012.049 | **ED3** 10.012.038 **N**



- Condensação e corte de guta-percha.
- Auxilia na remoção de pinos, quebrando a linha de cimentação entre o pino e as paredes do canal.
- **Não possui irrigação.**



E E3D 10.012.052 | **ED3D** 10.012.042 **N**

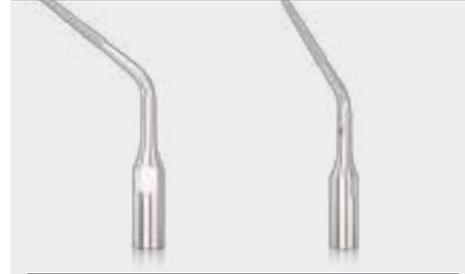

- Remoção do teto da câmara pulpar.
- Refinamento da cirurgia de acesso, calcificações internas e nódulos pulpares.



E E5 10.012.051 | **ED5** 10.012.040 **N**




- Corte e condensação da guta-percha.
- **Não possui irrigação.**



E E5D 10.012.054 | **ED5D** 10.012.044 **N**



- Remoção de calcificações.
- Limpeza da área de istmo.

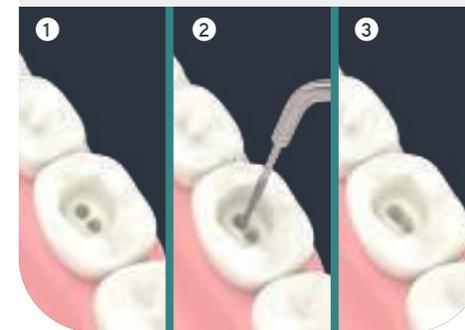



E COMPATIBILIDADE DO ENCAIXE: Advance 1; Advance 2; Advance View; Advance 5; Advance 6; Advance 7; Advanced S; Advanced SEL; Alt; Emissionic (MMO); EMS Pm100; EMS Pm200; Kavo; Kondortec; Mectron; Mini Piezon; Ortus; Scaler Jet; W&H; Woodpecker.

E COMPATIBILIDADE DO ENCAIXE: Advance 1; Advance 2; Advance View; Advance 5; Advance 6; Advance 7; Advanced S; Advanced SEL; Alt; Emissionic (MMO); EMS Pm100; EMS Pm200; Kavo; Kondortec; Mectron; Mini Piezon; Ortus; Scaler Jet; W&H; Woodpecker.

E ME1
10.012.173



- Realizar PUI (Passive Ultrasonic Irrigation).
- Atuar em áreas de istmo ou de difícil acesso.




E ME2D
10.012.174



- Refinar cirurgia de acesso.
- Remoção do teto da câmara pulpar.
- Remoção de nódulos e calcificações.



E ME3D
10.012.176

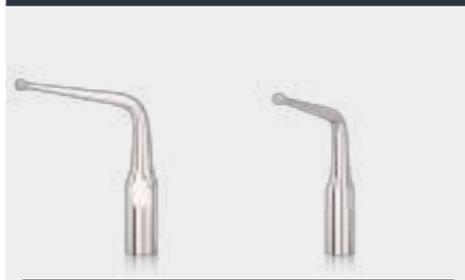

- Refinar cirurgia de acesso.
- Localizar canais calcificados.
- Remoção do teto da câmara pulpar.
- Remoção de nódulos e calcificações.



E ME4
10.012.177



- Atuar em áreas de istmo.
- Remoção de limas fraturadas.



E ME5
10.012.178



- Localizar canais calcificados.
- Desobturação e remoção de limas fraturadas.



E ME6D
10.012.179



- Localizar canais e refinar cirurgia de acesso.
- Remoção do teto da câmara pulpar.
- Remoção de obstruções coronárias.
- Remoção de calcificações e materiais restauradores.
- Remoção de cimentos temporários e permanentes.
- Remoção de pinos de fibra.





E COMPATIBILIDADE DO ENCAIXE: Advance 1; Advance 2; Advance View; Advance 5; Advance 6; Advance 7; Advanced S; Advanced SEL; Alt; Emissionic (MMO); EMS Pm100; EMS Pm200; Kavo; Kondortec; Mectron; Mini Piezon; Ortus; Scaler Jet; W&H; Woodpecker.



- Refinar cirurgia de acesso.
- Remoção de teto da câmara pulpar.
- Remoção de nódulos.
- Remoção de calcificações.


- Iniciar desobturação.

- Corte e condensação da guta-percha.
- **Não possui irrigação.**

- Remoção de pino metálico.

- Localizar canais calcificados.
- Remoção de lima fraturada.
- Atuar em áreas de istmo.

- Auxiliar no retratamento na etapa de desobturação.

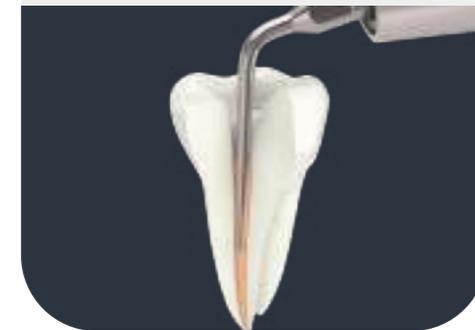




E COMPATIBILIDADE DO ENCAIXE: Advance 1; Advance 2; Advance View; Advance 5; Advance 6; Advance 7; Advanced S; Advanced SEL; Alt; Emissionic (MMO); EMS Pm100; EMS Pm200; Kavo; Kondortec; Mectron; Mini Piezon; Ortus; Scaler Jet; W&H; Woodpecker.

N COMPATIBILIDADE DO ENCAIXE: Adiel Plus; Advanced Se; DMC; DTE; Easy Sonic; GG Dent; Gnatus; Helse Ultrasonic; J Morita; NSK; Olsen; Ortus Import; Satelec; Shuster; Spartan; Ultradent; VDW; Vt150.

E P4 10.012.009 | **PD4** 10.012.019 **N**

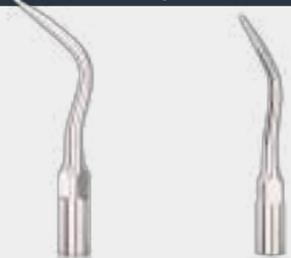

- Remoção do teto da câmara pulpar.
- Refinamento de cirurgia de acesso.



E P4D 10.012.046 | **PD4D** 10.012.064 **N**



- Remoção do teto da câmara pulpar.
- Refinamento de cirurgia de acesso.



PREPARO CAVITÁRIO





E COMPATIBILIDADE DO ENCAIXE: Advance 1; Advance 2; Advance View; Advance 5; Advance 6; Advance 7; Advanced S; Advanced SEL; Alt; Emissionic (MMO); EMS Pm100; EMS Pm200; Kavo; Kondortec; Mectron; Mini Piezon; Ortus; Scaler Jet; W&H; Woodpecker.

N COMPATIBILIDADE DO ENCAIXE: Adiel Plus; Advanced Se; DMC; DTE; Easy Sonic; GG Dent; Gnatus; Helse Ultrasonic; J Morita; NSK; Olsen; Ortus Import; Satelec; Shuster; Spartan; Ultradent; VDW; Vt150.

E COMPATIBILIDADE DO ENCAIXE: Advance 1; Advance 2; Advance View; Advance 5; Advance 6; Advance 7; Advanced S; Advanced SEL; Alt; Emissionic (MMO); EMS Pm100; EMS Pm200; Kavo; Kondortec; Mectron; Mini Piezon; Ortus; Scaler Jet; W&H; Woodpecker.

N COMPATIBILIDADE DO ENCAIXE: Adiel Plus; Advanced Se; DMC; DTE; Easy Sonic; GG Dent; Gnatus; Helse Ultrasonic; J Morita; NSK; Olsen; Ortus Import; Satelec; Shuster; Spartan; Ultradent; VDW; Vt150.

E SB1 10.012.055 | **SBD1** 10.012.065 **N**



- Ajuste de superfícies oclusais e cervicais.
- Remoção de materiais rígidos em procedimentos de restauração.



E SB2 10.012.056 | **SBD2** 10.012.066 **N**



- Ponta com parte ativa diamantada (metade da esfera superior) para auxiliar no preparo e ajustes de superfícies proximais (mesial) sem danificar o dente adjacente.



E SB3 10.012.057 | **SBD3** 10.012.067 **N**



- Ponta com parte ativa diamantada (metade da esfera inferior) para auxiliar no preparo e ajustes de superfícies proximais (distal) sem danificar o dente adjacente.



E SBL 10.012.058 | **SBDL** 10.012.068 **N**



- Parte ativa diamantada (metade esfera esquerda), com angulação em 45° para a esquerda, permite o acesso em áreas interproximais difíceis, auxiliando na remoção da lesão de cárie sem danificar áreas adjacentes.



E SBR 10.012.059 | **SBDR** 10.012.069 **N**




- Parte ativa diamantada (metade esfera direita), com angulação em 45° para a direita, permite o acesso em áreas interproximais difíceis, auxiliando na remoção da lesão de cárie sem danificar áreas adjacentes.



REMOÇÃO DE PINOS - RRIR

REMOÇÃO DE RETENTORES INTRA - RADICULARES

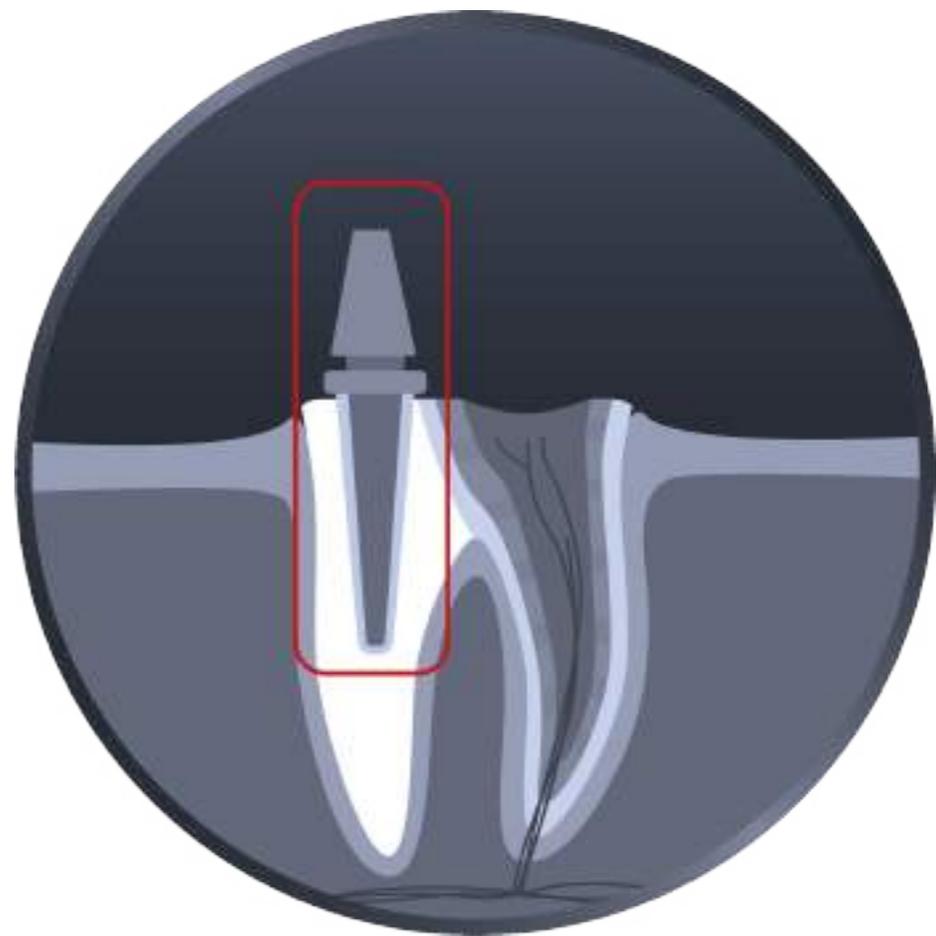



E COMPATIBILIDADE DO ENCAIXE: Advance 1; Advance 2; Advance View; Advance 5; Advance 6; Advance 7; Advanced S; Advanced SEL; Alt; Emissionic (MMO); EMS Pm100; EMS Pm200; Kavo; Kondortec; Mectron; Mini Piezon; Ortus; Scaler Jet; W&H; Woodpecker.

N COMPATIBILIDADE DO ENCAIXE: Adiei Plus; Advanced Se; DMC; DTE; Easy Sonic; GG Dent; Gnatus; Helse Ultrasonic; J Morita; NSK; Olsen; Ortus Import; Satelec; Shuster; Spartan; Ultradent; VDW; Vt150.

E C1 10.012.060 | **CD1 N** 10.012.070



- Remoção de pinos metálicos.
- Transferir a potência ultrassônica para cimentos cuja retenção é feita por princípios micromecânicos.
- Não indicado para cimentos do tipo adesivo.
- **Não possui irrigação.**



E C2 10.012.061 | **CD2 N** 10.012.071



- Remoção de pinos metálicos.
- Transferir a potência ultrassônica para cimentos cuja retenção é feita por princípios micromecânicos.
- Não indicado para cimentos do tipo adesivo.



E C3 10.012.062 | **CD3 N** 10.012.072



- Remoção de pinos metálicos.
- Indicado para utilizá-lo sobre a linha de cimentação.
- **Não possui irrigação.**



Verde: Nenhum sinal de desgaste - A ponteira está em perfeito estado.

Não há necessidade de reposição.




Amarelo: Desgaste de 1mm - A ponteira apresenta desgaste moderado.

Recomenda-se reposição.



Vermelho: Desgaste de 2mm - A ponteira apresenta desgaste severo.

Necessário reposição.

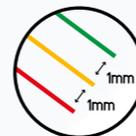

Antes do uso, verifique a integridade da ponteira. Em caso de desgaste severo (2mm) a Microdent indica o descarte para garantir o uso seguro e efetivo.

COMPATIBILIDADE

E

G1; G2; G3; G4; G5; G6; P1; P3; P3D; P4; P4D; E1; E2; E3; E3D; E4; E4D; E5; E5D; C1; C2; C3; SB1; SB2; SB3; SBR; SBL; ME1; ME2D; ME3D; ME4; ME5; ME6D; ME7D; ME8; ME10; ME12; ME18; MR1.

N

GD1; GD2; GD3; GD4; GD5; GD6; PD1; PD3; PD3D; PD4; PD4D; ED1; ED2; ED3; ED3D; ED5; ED5D; CD1; CD2; CD3; SBD1; SBD2; SBD3; SBDR; SBDL.

Advance 1	Adiei Plus
Advance 2	Advanced Se
Advance View	DMC
Advance 5	DTE
Advance 6	Easy Sonic
Advance 7	GG Dent
Advanced S	Gnatus
Advanced SEL	Helse Ultrasonic
Alt	J Morita
Emissionic (MMO)	NSK
EMS Pm100	Olsen
EMS Pm200	Ortus Import
Kavo	Satelec
Kondortec	Shuster
Mectron	Spartan
Mini Piezon	Ultradent
Ortus	VDW
Scaler Jet	Vt150
W&H	
Woodpecker	

E e N referem-se ao tipo de encaixe.



UMA MARCA **BRASILEIRA**, CRIANDO SORRISOS PELO **MUNDO**.

www.microdont.com.br

UMA MARCA **BRASILEIRA**
CRIANDO **SORRISOS** PELO **MUNDO**



  microdont

 microdont.com.br